



Ankylos®

Каталог продукції

Загальні рекомендації з ортопедичного лікування з Ankylos®

Щоб отримати максимальну користь від унікальних реставраційних можливостей системи імплантів Ankylos, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- Уникайте надмірного оклюзійного навантаження, старайтесь, щоб початкова інфраоклюзія забезпечувала наявність просвіту між функціональними контактами.
- За можливості використовуйте В-імпланти або імпланти більшого розміру для реставрації одиничних молярів.
- Використовуйте компоненти з висотою ясен 0,75 і 1,5 тільки в разі гострої необхідності за умов тонких ясен.
- Зведіть до мінімуму функціональну оклюзійну поверхню в щічно-язичному напрямку задля уникнення бічного тиску.
- Вживайте достатніх заходів, щоб запобігти надмірному оклюзійному навантаженню в разі використання ортопедичних консолей.
- Плануючи реставрацію одиничних зубів, пам'ятайте про опір деформації суміжних зубів. Встановлюйте повний контакт на коронці імплантата тільки під час максимального стискання щелеп для забезпечення рівномірного розподілу навантаження на всі зуби під час жування з максимальним зусиллям.
- Перевірте пацієнта на наявність парафункціональних звичок. Під час контрольних візитів поговоріть з ним про те, як їх позбутися.
- У випадку внесення будь-яких змін до оклюзійної схеми в інших ділянках необхідно оцінити наслідки для реставрації на імплантатах та за необхідності вжити відповідних заходів.
- Рекомендації для зуботехнічних лабораторій: в жодному разі не допускається зміна дизайну абатмента в частині з'єднувального конусу або поряд з борозною.

Перед використанням системи обов'язково уважно прочитайте цей посібник. Завжди дотримуйтеся клінічних показань, вказівок, а також приміток в інструкціях з використання компонентів та інструментів системи.

Крім того, перед першим використанням нової системи імплантів рекомендовано проходження спеціалізованого навчального курсу. Певні вироби можуть бути недоступні в деяких країнах. Актуальну інформацію про асортимент і наявність виробів можна отримати у вашого місцевого представника компанії Dentsply Sirona Implants.

З метою покращення читабельності документа компанія Dentsply Sirona Implants не використовує символи ® та ™ в основному тексті. Однак компанія Dentsply Sirona Implants не відмовляється від своїх прав на товарні знаки, і даний документ не може трактуватися інакше.

ЗМІСТ

Хірургія

Принцип пакування імплантата	4
Гвинти-заглушки для імплантатів	4
Діаметри і довжини імплантатів	5

Ортопедія

Ортопедичні концепції C/ и /X	Вступ	6
-------------------------------	-------	---

Ортопедичні концепції C/ (без індексу)	Огляд	8
Робота з м'якими тканинами і встановлення абатмента		14
Зняття відбитків C/ (без індексу)	З рівня імплантата	15
Regular C/*	Широкі абатменти під коронки і мостовидні конструкції	16
Balance Posterior C/	Вузькі абатменти під коронки і мостовидні конструкції	18
Balance Anterior C/	Анатомічні абатменти для переднього відділу	20
TitaniumBase C/	Металева платформа для індивідуальних керамічних абатментів	22
Atlantis®	Максимально індивідуалізовані абатменти за технологією CAD/CAM	23
Balance Base C/, концепція SmartFix®*	Оклюзійні мостовидні протези з гвинтовою фіксацією, балки	24
SynCone® C/*	Беззуба щелепа, стандартні конічні коронки	26
Кульковий замок C/*	Беззуба щелепа, стандартні ретенційні елементи	28
Ортопедичні реставрації з екстремально тонким типом ясен		28
Locator® C/	Беззуба щелепа, стандартні ретенційні елементи	29
Standard C/**	Коронки і мостовидні конструкції на рівні абатмента	30



Ортопедичні концепції /X (з індексом)	Огляд	34
Робота з м'якими тканинами і встановлення абатмента		36
Зняття відбитків /X (з індексом)	З рівня імплантата	37
Regular /X*	Широкі абатменти під коронки і мостовидні конструкції	38
Balance Anterior /X	Анатомічні абатменти для переднього відділу	40
TitaniumBase /X	Металева платформа для індивідуальних керамічних абатментів	41
Atlantis®	Максимально індивідуалізовані абатменти за технологією CAD/CAM	41



Інструменти

Хірургічні інструменти	Фрези, розгортки, мітчики, ключі-трісачки	42
Хірургічні набори, лоток Washtray		48
Додаткові хірургічні інструменти	Синус-ліфтинг, остеотомія, інструменти для розкриття, додаткове приладдя	50
Фізiodиспенсер	Додаткове приладдя, шланги системи охолодження	52
Ортопедичні інструменти		56

Моделі та матеріали

Демонстраційні моделі	60
Специфікації матеріалів	61
Показчик продукції	62

*Можливе також зняття відбитка з рівня абатмента.

** Зняття відбитка виключно з рівня абатмента.


Принцип пакування імплантата

Всі імплантати Ankylos C/X постачаються у подвійній стерильній блистерній упаковці, що в свою чергу запакована в картонну коробку. Такий спосіб пакування гарантує максимально можливу захищеність медичного виробу відповідно до суворих сучасних нормативів. Крім того, така упаковка ергономічна у використанні, полегшує зберігання і швидкий вибір імплантату.




Зовнішня упаковка

- Проста класифікація продукту завдяки бренд-специфічному дизайну, прозорому віконцю і кольоровому маркуванню діаметра імплантата.
- Велика наклейка з детальною інформацією про виріб.
- Вся важлива інформація залишається видимою під час складування.
- Інструкції з використання на кількох мовах.

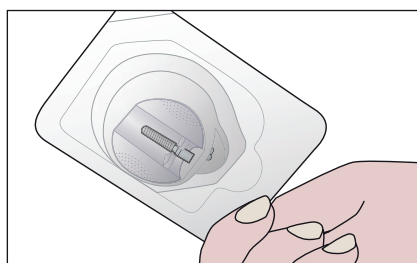


Прозорий зовнішній блистер

- Зовнішня стерильна бар'єрна система упаковки імплантата.

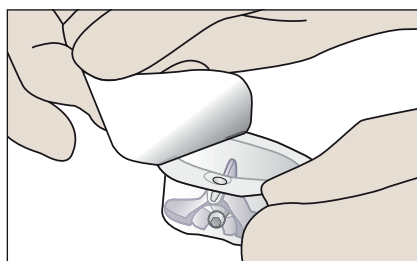

Прозорий внутрішній блистер

- Внутрішня стерильна упаковка.
- Містить вкладку з імплантатом і гвинт-заглушку.
- Відривна наклейка з номером партії для надійного задокументовування перебігу лікування.

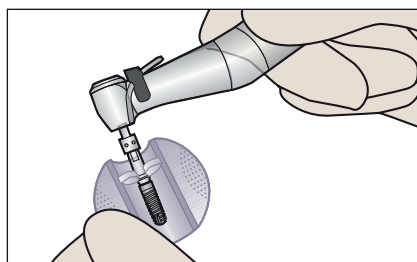

Пластмасова вкладка з імплантатом

- Надійно утримує імплантат в упаковці і захищає його від пошкоджень.
- Забезпечує просте безконтактне захоплення і перенесення імплантата в ротову порожнину під час операції.
- Має три крила з шорсткою нековзною поверхнею для простого і безпечного виймання імплантата.

Гвинти-заглушки для імплантатів

Гвинт-заглушка Ankylos (запасна деталь)

Мембранний гвинт Ankylos

Масштаб 1,5:1



1 мм

2 мм

Ø 3,5 мм

Ø 6,0 мм

Ø 6,0 мм
синус-ліфтинг,
1 мм


Ø 6,0 мм
синус-ліфтинг,
2 мм

Викрутка Арт.	1,0 мм, шестигранна 3101 0480	1,0 мм, шестигранна 3101 0481	1,0 мм, шестигранна 3101 0482	1,6 мм, шліцева 3101 0110	1,6 мм, шліцева 3101 0120	1,0 мм, шестигранна 3101 0130	1,0 мм, шестигранна 3101 0140
---------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Діаметри і довжини імплантатів

Імплантат Ankylos C/X² (стерильний)

Масштаб 1,2:1

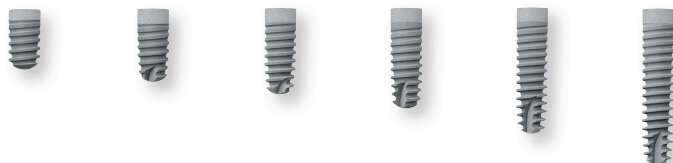

■ A6,6 ■ A8 ■ A9,5 ■ A11 ■ A14 ■ A17

Ø	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм
Довжина	6,6 мм	8 мм	9,5 мм	11 мм	14 мм	17 мм
Арт.	3101 0403	3101 0405	3101 0408	3101 0410	3101 0420	3101 0422

Імплантат Ankylos C/X2 (стерильний)

Комплектація: гвинтовий імплантат з гвинтом-заглушкою (входить в комплект) і попередньо вмонтованою установочною головкою.

Тип загоєння

- Закрите або відкрите з формувачем ясен.


Масштаб 1,2:1



■ B6,6 ■ B8 ■ B9,5 ■ B11 ■ B14 ■ B17

Ø	4,5 мм	4,5 мм	4,5 мм	4,5 мм	4,5 мм	4,5 мм
Довжина	6,6 мм	8 мм	9,5 мм	11 мм	14 мм	17 мм
Арт.	3101 0423	3101 0425	3101 0428	3101 0430	3101 0440	3101 0450

Рентгенологічний шаблон Ankylos для імплантатів

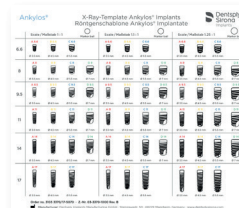

Зменшений масштаб

Арт.	3103 3370
------	-----------


Масштаб 1,2:1



■ C6,6 ■ C8 ■ C9,5 ■ C11 ■ C14 ■ C17

Ø	5,5 мм	5,5 мм	5,5 мм	5,5 мм	5,5 мм	5,5 мм
Довжина	6,6 мм	8 мм	9,5 мм	11 мм	14 мм	17 мм
Арт.	3101 0452	3101 0453	3101 0455	3101 0458	3101 0460	3101 0470

Масштаб 1,2:1

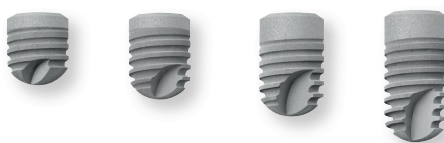

■ D8 ■ D9,5 ■ D11 ■ D14

Ø		7 мм	7 мм	7 мм	7 мм
Довжина		8 мм	9,5 мм	11 мм	14 мм
Арт.		3101 0472	3101 0474	3101 0476	3101 0478

ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення імплантатів:

Імплантовод Ankylos

Від'єднання установочної головки, встановлення гвинта-заглушки:

Шестигранна викрутка 1,0 мм

Встановлення імплантатів і від'єднання установочної головки без зміни інструмента:


Імплантовод Ankylos C/X з викруткою

Ортопедичні концепції C/ та /X — вступ


Широкий вибір неіндексованих та індексованих ортопедичних компонентів, легке позиціонування абатментів

- Конічне з'єднання TissueCare забезпечує оптимальну стабільність і блокування обертання з усіма видами імплантатів.

- Неіндексовані компоненти для свободи позиціонування абатментів.

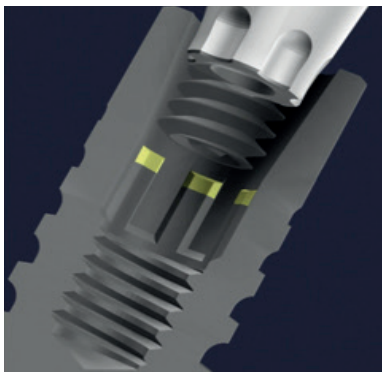

C/

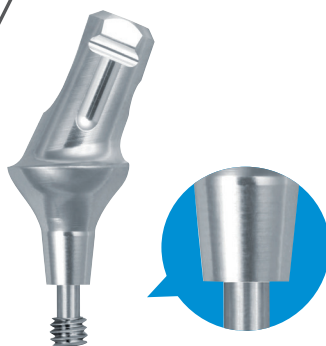

/X



Лише імплантати Ankylos C/X дозволяють вам обирати: використовувати індекс для полегшення орієнтації, якщо це спрощує ортопедичний протокол, або використовувати геометрію конічного з'єднання, коли це більш доцільно за ортопедичним протоколом, наприклад, використовуючи абатменти Ankylos SynCone. Обидві процедури забезпечують можливість вільного комбінування, тобто будь-який абатмент підходить до будь-якого імплантата.



Принципи конструювання абатментів

Формувач ясен

Більшість формувачів ясен є суцільними компонентами, призначеними для встановлення в імплантат за допомогою шестигранної викрутки 1,0 мм.

Формувач ясен Balance Anterior C/ складається з двох частин з окремим гвинтом, що дозволяє індивідуалізоване застосування компонента і його фіксацію у потрібному положенні. Гвинт вкручують за допомогою шестигранної викрутки 1,0 мм.



Тимчасові абатменти

Тимчасові абатменти Balance C/ виготовлено з підсиленого цирконієм поліетеретеркетону (PEEK). Вони складаються з двох частин і мають окремий гвинт (1,0 мм, шестигранна голівка).


Трансфери

В наявності трансфери для методів відритої ложки і закритої ложки.

Трансфери з позначенням C/ переносять положення імплантату без індексу. Трансфери з позначенням /X переносять положення імплантата і орієнтацію індексу, тому вони довші. Всі трансфери мають 1 мм шестигранник з боку оклюзійної поверхні, котрий слід використовувати виключно для послаблення абатмента.

Трансфери C/ для методу відритої ложки складаються з двох частин і мають окремий гвинт. Трансфери C/ для методу закритої ложки є суцільними компонентами.

Трансфери /X завжди мають інтегрований фіксаційний гвинт.

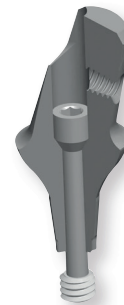

Ортопедичні абатменти

Багато ортопедичних абатментів (наприклад, абатменти Regular) мають інтегрований фіксаційний гвинт. Цей гвинт рухомий, але не знімний. Абатменти з інтегрованим фіксаційним гвинтом завжди вкручуються в імплантат за допомогою шестигранної викрутки 1,0 мм.

Однокомпонентні абатменти (наприклад, вузькі і прямі абатменти Balance Base) встановлюють за допомогою спеціальних інструментів, котрі підбирають відповідно до голівки абатмента.

Всі ортопедичні компоненти Ankylos мають лазерне маркування на позначення їх застосування:


- Компоненти з маркуванням C/ підходять тільки для кінцевого з'єднання і не мають індексу. Це означає, що абатменти можна встановлювати в будь-якому положенні. Кінцеве з'єднання повністю виключає обертання за рахунок тертя.
- Компоненти з маркуванням /X індексовані. Індекс використовують для встановлення абатментів в імплантат в одному з шести можливих положень. В цьому випадку оптимальна стабільність і блокування обертання також досягаються за рахунок кінцевого з'єднання.
- Компоненти з маркуванням C/X використовують як для індексованого, так і неіндексованого протезування.

Примітка

Імплантати Ankylos C/X можна використовувати тільки з компонентами, що мають лазерне маркування C/X, C/ або /X, або ж з компонентами, що належать до наступних груп виробів: абатменти і трансфери для методу закритої ложки Ankylos Balance Anterior і Posterior, абатменти Ankylos Cercon Balance, тимчасові абатменти Balance, формувачі ясен Balance Anterior і абатменти SynCone.

Ортопедичні концепції C/ (без індексу) — огляд

Коронки і мостовидні конструкції	Формувачі ясен	Перенесення з рівня імплантата
Balance Anterior C/	Формувач ясен Balance Anterior C/ 3102 1510 1,5 маленький 3102 1515 3,0 маленький 3102 1520 1,5 великий 3102 1525 3,0 великий	
Cercon Balance C/	Формувач ясен Balance Anterior C/ 3102 1510 1,5 маленький 3102 1515 3,0 маленький 3102 1520 1,5 великий 3102 1525 3,0 великий	3104 5400 Гвинт для трансфера C/, короткий 3104 5402 Гвинт для трансфера C/, довгий 3104 5410 Трансфер C/, короткий 3104 5412 Трансфер C/, довгий 3104 5415 Трансфер C/, (зл) 3104 5416 Трансфер C/, вузький (зл) 3104 5270 Аналог А імплантата Balance C/
Regular C/	Формувач ясен Regular C/X 3102 4010 GH 0,75 3102 4012 GH 1,5 3102 4014 GH 3,0 3102 4016 GH 4,5	

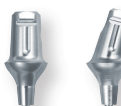Абатменти	Перенесення з рівня абатмента, аналог абатмента	Додаткове приладдя	Гвинтова фіксація																																																																
 Абатмент Balance Anterior C/ <table><tr><td>3102 1550</td><td>маленький</td><td>GH 1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1560</td><td>маленький</td><td>GH 3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1590</td><td>маленький</td><td>GH 1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1600</td><td>маленький</td><td>GH 3,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1570</td><td>великий</td><td>GH 1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1580</td><td>великий</td><td>GH 3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1610</td><td>великий</td><td>GH 1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1620</td><td>великий</td><td>GH 3,0</td><td>A 15</td></tr></table>	3102 1550	маленький	GH 1,5	A 0	3102 1560	маленький	GH 3,0	A 0	3102 1590	маленький	GH 1,5	A 15	3102 1600	маленький	GH 3,0	A 15	3102 1570	великий	GH 1,5	A 0	3102 1580	великий	GH 3,0	A 0	3102 1610	великий	GH 1,5	A 15	3102 1620	великий	GH 3,0	A 15		 Тимчасовий абатмент <table><tr><td>3102 3311</td><td>маленький</td><td>1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 3316</td><td>маленький</td><td>3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 3331</td><td>маленький</td><td>1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 3336</td><td>маленький</td><td>3,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 3351</td><td>великий</td><td>1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 3356</td><td>великий</td><td>3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 3371</td><td>великий</td><td>1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 3376</td><td>великий</td><td>3,0</td><td>A 15</td></tr></table>	3102 3311	маленький	1,5	A 0	3102 3316	маленький	3,0	A 0	3102 3331	маленький	1,5	A 15	3102 3336	маленький	3,0	A 15	3102 3351	великий	1,5	A 0	3102 3356	великий	3,0	A 0	3102 3371	великий	1,5	A 15	3102 3376	великий	3,0	A 15	 3105 6301 Латеральний фіксаційний шестигранний гвинт М 1,4  3105 6304 Горизонтальне посадочне кільце для фіксаційного гвинта М 1,4
3102 1550	маленький	GH 1,5	A 0																																																																
3102 1560	маленький	GH 3,0	A 0																																																																
3102 1590	маленький	GH 1,5	A 15																																																																
3102 1600	маленький	GH 3,0	A 15																																																																
3102 1570	великий	GH 1,5	A 0																																																																
3102 1580	великий	GH 3,0	A 0																																																																
3102 1610	великий	GH 1,5	A 15																																																																
3102 1620	великий	GH 3,0	A 15																																																																
3102 3311	маленький	1,5	A 0																																																																
3102 3316	маленький	3,0	A 0																																																																
3102 3331	маленький	1,5	A 15																																																																
3102 3336	маленький	3,0	A 15																																																																
3102 3351	великий	1,5	A 0																																																																
3102 3356	великий	3,0	A 0																																																																
3102 3371	великий	1,5	A 15																																																																
3102 3376	великий	3,0	A 15																																																																
 Абатмент Cercon Balance C/ <table><tr><td>нейтральний</td><td>дентин</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3102 3010</td><td>3102 3310</td><td>маленький</td><td>GH 1,5 A 0</td></tr><tr><td>3102 3015</td><td>3102 3315</td><td>маленький</td><td>GH 3,0 A 0</td></tr><tr><td>3102 3030</td><td>3102 3330</td><td>маленький</td><td>GH 1,5 A 15</td></tr><tr><td>3102 3035</td><td>3102 3335</td><td>маленький</td><td>GH 3,0 A 15</td></tr><tr><td>3102 3050</td><td>3102 3350</td><td>великий</td><td>GH 1,5 A 0</td></tr><tr><td>3102 3055</td><td>3102 3355</td><td>великий</td><td>GH 3,0 A 0</td></tr><tr><td>3102 3070</td><td>3102 3370</td><td>великий</td><td>GH 1,5 A 15</td></tr><tr><td>3102 3075</td><td>3102 3375</td><td>великий</td><td>GH 3,0 A 15</td></tr></table>	нейтральний	дентин			3102 3010	3102 3310	маленький	GH 1,5 A 0	3102 3015	3102 3315	маленький	GH 3,0 A 0	3102 3030	3102 3330	маленький	GH 1,5 A 15	3102 3035	3102 3335	маленький	GH 3,0 A 15	3102 3050	3102 3350	великий	GH 1,5 A 0	3102 3055	3102 3355	великий	GH 3,0 A 0	3102 3070	3102 3370	великий	GH 1,5 A 15	3102 3075	3102 3375	великий	GH 3,0 A 15																															
нейтральний	дентин																																																																		
3102 3010	3102 3310	маленький	GH 1,5 A 0																																																																
3102 3015	3102 3315	маленький	GH 3,0 A 0																																																																
3102 3030	3102 3330	маленький	GH 1,5 A 15																																																																
3102 3035	3102 3335	маленький	GH 3,0 A 15																																																																
3102 3050	3102 3350	великий	GH 1,5 A 0																																																																
3102 3055	3102 3355	великий	GH 3,0 A 0																																																																
3102 3070	3102 3370	великий	GH 1,5 A 15																																																																
3102 3075	3102 3375	великий	GH 3,0 A 15																																																																
 Абатмент Regular C/ <table><tr><td>3102 4150</td><td>GH 0,75</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 4160</td><td>GH 1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 4170</td><td>GH 3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 4180</td><td>GH 4,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 4151</td><td>GH 0,75</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 4161</td><td>GH 1,5</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 4171</td><td>GH 3,0</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 4181</td><td>GH 4,5</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 4152</td><td>GH 0,75</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 4162</td><td>GH 1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 4172</td><td>GH 3,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 4182</td><td>GH 4,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 4153</td><td>GH 0,75</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 4163</td><td>GH 1,5</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 4173</td><td>GH 3,0</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 4183</td><td>GH 4,5</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 4154</td><td>GH 0,75</td><td>A 30</td></tr><tr><td>3102 4164</td><td>GH 1,5</td><td>A 30</td></tr><tr><td>3102 4155</td><td>GH 0,75</td><td>A 37,5</td></tr></table>	3102 4150	GH 0,75	A 0	3102 4160	GH 1,5	A 0	3102 4170	GH 3,0	A 0	3102 4180	GH 4,5	A 0	3102 4151	GH 0,75	A 7,5	3102 4161	GH 1,5	A 7,5	3102 4171	GH 3,0	A 7,5	3102 4181	GH 4,5	A 7,5	3102 4152	GH 0,75	A 15	3102 4162	GH 1,5	A 15	3102 4172	GH 3,0	A 15	3102 4182	GH 4,5	A 15	3102 4153	GH 0,75	A 22,5	3102 4163	GH 1,5	A 22,5	3102 4173	GH 3,0	A 22,5	3102 4183	GH 4,5	A 22,5	3102 4154	GH 0,75	A 30	3102 4164	GH 1,5	A 30	3102 4155	GH 0,75	A 37,5	 3104 7120 Ковпачок 3 в 1 Regular C/X A 0 3104 7110 Аналог абатмента Regular C/X A 0 3104 7121 Ковпачок 3 в 1 Regular C/X A 7,5 3104 7111 Аналог абатмента Regular C/X A 7,5 3104 7122 Ковпачок 3 в 1 Regular C/X A 15 3104 7112 Аналог абатмента Regular C/X A 15 3104 7123 Ковпачок 3 в 1 Regular C/X A 22,5 3104 7113 Аналог абатмента Regular C/X A 22,5		 3105 6301 Латеральний фіксаційний шестигранний гвинт М 1,4  3105 6304 Горизонтальне посадочне кільце для фіксаційного гвинта М 1,4							
3102 4150	GH 0,75	A 0																																																																	
3102 4160	GH 1,5	A 0																																																																	
3102 4170	GH 3,0	A 0																																																																	
3102 4180	GH 4,5	A 0																																																																	
3102 4151	GH 0,75	A 7,5																																																																	
3102 4161	GH 1,5	A 7,5																																																																	
3102 4171	GH 3,0	A 7,5																																																																	
3102 4181	GH 4,5	A 7,5																																																																	
3102 4152	GH 0,75	A 15																																																																	
3102 4162	GH 1,5	A 15																																																																	
3102 4172	GH 3,0	A 15																																																																	
3102 4182	GH 4,5	A 15																																																																	
3102 4153	GH 0,75	A 22,5																																																																	
3102 4163	GH 1,5	A 22,5																																																																	
3102 4173	GH 3,0	A 22,5																																																																	
3102 4183	GH 4,5	A 22,5																																																																	
3102 4154	GH 0,75	A 30																																																																	
3102 4164	GH 1,5	A 30																																																																	
3102 4155	GH 0,75	A 37,5																																																																	

Ортопедичні концепції C/ (без індексу) — огляд

Коронки і мостовидні конструкції	Формувачі ясен	Перенесення з рівня імплантата
Balance Posterior C/	 Формувач ясен Balance Posterior C/ 3102 1528 GH 0,75 3102 1530 GH 1,5 3102 1535 GH 3,0 3102 1540 GH 4,5	 3104 5400 Гвинт для трансфера C/, короткий 3104 5402 Гвинт для трансфера C/, довгий 3104 5410 Транфсер C/, короткий 3104 5412 Транфсер C/, довгий 3104 5415 Транфсер C/, (зл) 3104 5416 Транфсер C/, вузький (зл) 3104 5270 Аналог А імплантата Balance C/
TitaniumBase C/	Індивідуальне формування ясен	
Standard C/	 Формувач ясен Standard C/ 3102 1011 a / 1,5 3102 1021 a / 3,0 3102 1026 a / 4,5 3102 1028 a / 6,0 3102 1031 b / 1,5 3102 1041 b / 3,0	

Абатменти	Перенесення з рівня абатмента, аналог абатмента	Додаткове приладдя	Гвинтова фіксація																																																																																														
 Абатмент Balance Posterior C/ <table><tr><td>3102 1625</td><td>GH 0,75</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1647</td><td>GH 0,75</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 1648</td><td>GH 0,75</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1652</td><td>GH 0,75</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 1654</td><td>GH 0,75</td><td>A 30</td></tr><tr><td>3102 1659</td><td>GH 0,75</td><td>A 37,5</td></tr><tr><td>3102 1630</td><td>GH 1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1649</td><td>GH 1,5</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 1650</td><td>GH 1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1653</td><td>GH 1,5</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 1655</td><td>GH 1,5</td><td>A 30</td></tr><tr><td>3102 1640</td><td>GH 3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1660</td><td>GH 3,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1645</td><td>GH 4,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1665</td><td>GH 4,5</td><td>A 15</td></tr></table>	3102 1625	GH 0,75	A 0	3102 1647	GH 0,75	A 7,5	3102 1648	GH 0,75	A 15	3102 1652	GH 0,75	A 22,5	3102 1654	GH 0,75	A 30	3102 1659	GH 0,75	A 37,5	3102 1630	GH 1,5	A 0	3102 1649	GH 1,5	A 7,5	3102 1650	GH 1,5	A 15	3102 1653	GH 1,5	A 22,5	3102 1655	GH 1,5	A 30	3102 1640	GH 3,0	A 0	3102 1660	GH 3,0	A 15	3102 1645	GH 4,5	A 0	3102 1665	GH 4,5	A 15			 3105 6051 Латеральний ретенційний шестигранний гвинт М 1 x 0,2  3105 6052 Гільза для латерального ретенційного шестигранного гвинта																																																	
3102 1625	GH 0,75	A 0																																																																																															
3102 1647	GH 0,75	A 7,5																																																																																															
3102 1648	GH 0,75	A 15																																																																																															
3102 1652	GH 0,75	A 22,5																																																																																															
3102 1654	GH 0,75	A 30																																																																																															
3102 1659	GH 0,75	A 37,5																																																																																															
3102 1630	GH 1,5	A 0																																																																																															
3102 1649	GH 1,5	A 7,5																																																																																															
3102 1650	GH 1,5	A 15																																																																																															
3102 1653	GH 1,5	A 22,5																																																																																															
3102 1655	GH 1,5	A 30																																																																																															
3102 1640	GH 3,0	A 0																																																																																															
3102 1660	GH 3,0	A 15																																																																																															
3102 1645	GH 4,5	A 0																																																																																															
3102 1665	GH 4,5	A 15																																																																																															
 TitaniumBase C/ <table><tr><td>3102 2642</td><td>TitaniumBase C/</td></tr><tr><td>3102 2652</td><td>TitaniumBase C/ висока</td></tr></table>	3102 2642	TitaniumBase C/	3102 2652	TitaniumBase C/ висока		 ScanBase C/ <table><tr><td>3102 2644</td><td>ScanBase C/</td></tr><tr><td>3102 2654</td><td>ScanBase C/ висока</td></tr></table>	3102 2644	ScanBase C/	3102 2654	ScanBase C/ висока																																																																																							
3102 2642	TitaniumBase C/																																																																																																
3102 2652	TitaniumBase C/ висока																																																																																																
3102 2644	ScanBase C/																																																																																																
3102 2654	ScanBase C/ висока																																																																																																
 Абатмент Standard C/ <table><tr><td>3102 1050</td><td>a / 1,5 / 4,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1070</td><td>a / 3,0 / 4,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1076</td><td>a / 4,5 / 4,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1078</td><td>a / 6,0 / 4,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1130</td><td>a / 1,5 / 4,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1150</td><td>a / 3,0 / 4,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1060</td><td>a / 1,5 / 6,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1080</td><td>a / 3,0 / 6,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1140</td><td>a / 1,5 / 6,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1160</td><td>a / 3,0 / 6,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1090</td><td>b / 1,5 / 4,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1110</td><td>b / 3,0 / 4,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1170</td><td>b / 1,5 / 4,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1190</td><td>b / 3,0 / 4,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1100</td><td>b / 1,5 / 6,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1120</td><td>b / 3,0 / 6,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 1180</td><td>b / 1,5 / 6,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 1200</td><td>b / 3,0 / 6,0</td><td>A 15</td></tr></table>	3102 1050	a / 1,5 / 4,0	A 0	3102 1070	a / 3,0 / 4,0	A 0	3102 1076	a / 4,5 / 4,0	A 0	3102 1078	a / 6,0 / 4,0	A 0	3102 1130	a / 1,5 / 4,0	A 15	3102 1150	a / 3,0 / 4,0	A 15	3102 1060	a / 1,5 / 6,0	A 0	3102 1080	a / 3,0 / 6,0	A 0	3102 1140	a / 1,5 / 6,0	A 15	3102 1160	a / 3,0 / 6,0	A 15	3102 1090	b / 1,5 / 4,0	A 0	3102 1110	b / 3,0 / 4,0	A 0	3102 1170	b / 1,5 / 4,0	A 15	3102 1190	b / 3,0 / 4,0	A 15	3102 1100	b / 1,5 / 6,0	A 0	3102 1120	b / 3,0 / 6,0	A 0	3102 1180	b / 1,5 / 6,0	A 15	3102 1200	b / 3,0 / 6,0	A 15	 <table><tr><td>3104 5011</td><td>Ковпачок для відбитків a / - / 4,0</td></tr><tr><td>3104 5140</td><td>Лабораторний аналог a / - / 4,0 A 0</td></tr><tr><td>3104 5142</td><td>Лабораторний аналог a / - / 4,0 A 15</td></tr><tr><td>3104 5021</td><td>Ковпачок для відбитків a / - / 6,0</td></tr><tr><td>3104 5150</td><td>Лабораторний аналог a / - / 6,0 A 0</td></tr><tr><td>3104 5152</td><td>Лабораторний аналог a / - / 6,0 A 15</td></tr><tr><td>3104 5031</td><td>Ковпачок для відбитків b / - / 4,0</td></tr><tr><td>3104 5160</td><td>Лабораторний аналог b / - / 4,0 A 0</td></tr><tr><td>3104 5162</td><td>Лабораторний аналог b / - / 4,0 A 15</td></tr><tr><td>3104 5041</td><td>Ковпачок для відбитків b / - / 6,0</td></tr><tr><td>3104 5170</td><td>Лабораторний аналог b / - / 6,0 A 0</td></tr><tr><td>3104 5172</td><td>Лабораторний аналог b / - / 6,0 A 15</td></tr></table>	3104 5011	Ковпачок для відбитків a / - / 4,0	3104 5140	Лабораторний аналог a / - / 4,0 A 0	3104 5142	Лабораторний аналог a / - / 4,0 A 15	3104 5021	Ковпачок для відбитків a / - / 6,0	3104 5150	Лабораторний аналог a / - / 6,0 A 0	3104 5152	Лабораторний аналог a / - / 6,0 A 15	3104 5031	Ковпачок для відбитків b / - / 4,0	3104 5160	Лабораторний аналог b / - / 4,0 A 0	3104 5162	Лабораторний аналог b / - / 4,0 A 15	3104 5041	Ковпачок для відбитків b / - / 6,0	3104 5170	Лабораторний аналог b / - / 6,0 A 0	3104 5172	Лабораторний аналог b / - / 6,0 A 15	 <table><tr><td>3104 5180</td><td>Моделювальний ковпачок a / -- / 4,0 коронка</td></tr><tr><td>3104 5182</td><td>Моделювальний ковпачок a / -- / 4,0 мостовидний протез</td></tr><tr><td>3104 5190</td><td>Моделювальний ковпачок a / -- / 6,0 коронка</td></tr><tr><td>3104 5192</td><td>Моделювальний ковпачок a / -- / 6,0 мостовидний протез</td></tr><tr><td>3104 5200</td><td>Моделювальний ковпачок b / -- / 4,0 коронка</td></tr><tr><td>3104 5202</td><td>Моделювальний ковпачок b / -- / 4,0 мостовидний протез</td></tr><tr><td>3104 5210</td><td>Моделювальний ковпачок b / -- / 6,0 коронка</td></tr><tr><td>3104 5212</td><td>Моделювальний ковпачок b / -- / 6,0 мостовидний протез</td></tr></table>	3104 5180	Моделювальний ковпачок a / -- / 4,0 коронка	3104 5182	Моделювальний ковпачок a / -- / 4,0 мостовидний протез	3104 5190	Моделювальний ковпачок a / -- / 6,0 коронка	3104 5192	Моделювальний ковпачок a / -- / 6,0 мостовидний протез	3104 5200	Моделювальний ковпачок b / -- / 4,0 коронка	3104 5202	Моделювальний ковпачок b / -- / 4,0 мостовидний протез	3104 5210	Моделювальний ковпачок b / -- / 6,0 коронка	3104 5212	Моделювальний ковпачок b / -- / 6,0 мостовидний протез	 3105 6022 Оклюзійний фіксаційний гвинт М 1,6  3105 6051 Латеральний ретенційний шестигранний гвинт М 1 x 0,2  3105 6052 Гільза для латерального ретенційного шестигранного гвинта
3102 1050	a / 1,5 / 4,0	A 0																																																																																															
3102 1070	a / 3,0 / 4,0	A 0																																																																																															
3102 1076	a / 4,5 / 4,0	A 0																																																																																															
3102 1078	a / 6,0 / 4,0	A 0																																																																																															
3102 1130	a / 1,5 / 4,0	A 15																																																																																															
3102 1150	a / 3,0 / 4,0	A 15																																																																																															
3102 1060	a / 1,5 / 6,0	A 0																																																																																															
3102 1080	a / 3,0 / 6,0	A 0																																																																																															
3102 1140	a / 1,5 / 6,0	A 15																																																																																															
3102 1160	a / 3,0 / 6,0	A 15																																																																																															
3102 1090	b / 1,5 / 4,0	A 0																																																																																															
3102 1110	b / 3,0 / 4,0	A 0																																																																																															
3102 1170	b / 1,5 / 4,0	A 15																																																																																															
3102 1190	b / 3,0 / 4,0	A 15																																																																																															
3102 1100	b / 1,5 / 6,0	A 0																																																																																															
3102 1120	b / 3,0 / 6,0	A 0																																																																																															
3102 1180	b / 1,5 / 6,0	A 15																																																																																															
3102 1200	b / 3,0 / 6,0	A 15																																																																																															
3104 5011	Ковпачок для відбитків a / - / 4,0																																																																																																
3104 5140	Лабораторний аналог a / - / 4,0 A 0																																																																																																
3104 5142	Лабораторний аналог a / - / 4,0 A 15																																																																																																
3104 5021	Ковпачок для відбитків a / - / 6,0																																																																																																
3104 5150	Лабораторний аналог a / - / 6,0 A 0																																																																																																
3104 5152	Лабораторний аналог a / - / 6,0 A 15																																																																																																
3104 5031	Ковпачок для відбитків b / - / 4,0																																																																																																
3104 5160	Лабораторний аналог b / - / 4,0 A 0																																																																																																
3104 5162	Лабораторний аналог b / - / 4,0 A 15																																																																																																
3104 5041	Ковпачок для відбитків b / - / 6,0																																																																																																
3104 5170	Лабораторний аналог b / - / 6,0 A 0																																																																																																
3104 5172	Лабораторний аналог b / - / 6,0 A 15																																																																																																
3104 5180	Моделювальний ковпачок a / -- / 4,0 коронка																																																																																																
3104 5182	Моделювальний ковпачок a / -- / 4,0 мостовидний протез																																																																																																
3104 5190	Моделювальний ковпачок a / -- / 6,0 коронка																																																																																																
3104 5192	Моделювальний ковпачок a / -- / 6,0 мостовидний протез																																																																																																
3104 5200	Моделювальний ковпачок b / -- / 4,0 коронка																																																																																																
3104 5202	Моделювальний ковпачок b / -- / 4,0 мостовидний протез																																																																																																
3104 5210	Моделювальний ковпачок b / -- / 6,0 коронка																																																																																																
3104 5212	Моделювальний ковпачок b / -- / 6,0 мостовидний протез																																																																																																

Ортопедичні концепції C/ (без індексу) — огляд


Покривний протез C/	Формувачі ясен	Перенесення з рівня імплантата	Абатменти
Balance Base C/ (концепція SmartFix)	 Формувач ясен C/, D 4,2 3102 2510GH 0,75 3102 2512GH 1,5 3102 2514GH 3,0 3102 2516GH 4,5		 Balance Base Abutment C/ 3102 2520вузькийGH 0,75A 0 3102 2530вузькийGH 1,5A 0 3102 2540вузькийGH 3,0A 0 3102 2542GH 3,0A 15 3102 2546GH 3,0A 30 3102 2550вузькийGH 4,5A 0 3102 2552GH 4,5A 15 3102 2556GH 4,5A 30
Кульковий замок C/	 Формувач ясен C/ Standard 3102 1011a / 1,5 3102 1021a / 3,0 3102 1026a / 4,5	 3104 5400Гвинт для трансфера C/ короткий 3104 5402Гвинт для трансфера C/ довгий 3104 5410Трансфер C/ короткий 3104 5412Трансфер C/ довгий 3104 5415Трансфер C/ вузький 3104 5416Трансфер C/ вузький 3104 5270Аналог А імплантата Balance C/	 Кульковий замок C/ 3102 1300GH 1,5 3102 1310GH 3,0 3102 1320GH 4,5
Locator C/			 Абатмент Locator C/ 3102 2610GH 2,0 3102 2612GH 3,0 3102 2614GH 4,0 3102 2616GH 5,0 3102 2618GH 6,0
SynCone C/	 Формувач ясен C/ D 4,2 3102 2512GH 1,5 3102 2514GH 3,0 3102 2516GH 4,5		 Абатмент SynCone C/ 3102 2110GH 1,5A 05° 3102 2112GH 1,5A 7,55° 3102 2114GH 1,5A 155° 3102 2116GH 1,5A 22,55° 3102 2118GH 1,5A 305° 3102 2120GH 3,0A 05° 3102 2122GH 3,0A 7,55° 3102 2124GH 3,0A 155° 3102 2126GH 3,0A 22,55° 3102 2128GH 3,0A 305° 3102 2130GH 4,5A 05° 3102 2132GH 4,5A 7,55° 3102 2134GH 4,5A 155° 3102 2136GH 4,5A 22,55° 3102 2138GH 4,5A 305°

Перенесення з рівня абатмента, аналог абатмента	Другорядні компоненти	Додаткове приладдя	Гвинтова фіксація
 3105 6216 Ретенційний ковпачок 3105 6025 Фіксаційний гвинт екстра-довгий 3104 5332 Аналог	 3105 6212 Золотий ковпачок 3105 6216 Ретенційний ковпачок 3105 6217 Ретенційний ковпачок довгий 3105 6218 Титановий ковпачок	 3104 5322 Моделювальний ковпачок 3105 6025 Фіксаційний гвинт екстра-довгий 3105 6026 Фіксаційний гвинт 19 мм 3102 2590 Захисний ковпачок для вузького абатмента Balance Base	 3105 6022 Оклюзійний фіксаційний гвинт М 1,6  3105 6024 Оклюзійний фіксаційний гвинт М 1,6 довгий
 3104 5220* Лабораторний аналог	 3102 1312** Матриця для кулькового замка		
 45 - 3355 Трансфер для відбитків (4 шт.) 45 - 3356 Матричний аналог (4 шт.) D4	 3245 3347 Набір аттачментів (титан) 3245 3348 Набір аттачментів (нерж. сталь)	 Змінна матриця (4 шт.) 45 - 3349 прозора 45 - 3352 зелена 45 - 3350 рожева 45 - 3353 померанчева 45 - 3351 синя 45 - 3354 червона 45 - 3360 сіра 45 - 3358 Робоча змінна матриця (4 шт.) 45 - 3359 Спейсерне кільце (20 шт.) 45 - 3361 Спейсерний ковпачок (4 шт.)	
 3102 2198 Конусний ковпачок 5° з ретенційними елементами	 3102 2198 Конусний ковпачок 5° з ретенційними елементами 3102 2199 Конусний ковпачок 5° без ретенційних елементів	 3105 6280 Гвинт-заглушка для прямого абатмента 5° 3102 1405 Гільза для полімеризації	

* Безпосереднє зняття відбитка кулькового замка.

** Замок 3102 1312 входить в комплект 3102 1300, 1310, 1320.


Робота з м'якими тканинами і встановлення абатмента

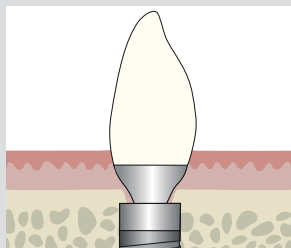

Зміщення переходу між імплантатом і абатментом до центру

Під час контурування м'яких тканин та вибору постійного абатмента необхідно враховувати деякі особливі характеристики:


- Через кінцеве з'єднання діаметр абатментів Ankylos на рівні імплантата значно менший за діаметр самого імплантата.
- М'які тканини також знаходяться під краями абатмента.

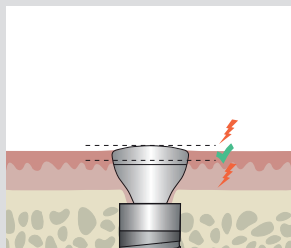

Вибір потрібної висоти ясен

- На малюнку показано правильне застосування формувача ясен.
- Якщо рівень ясен знаходиться в проміжку між двома пунктирними лініями, формувач ясен підібрано правильно.


- Якщо рівень ясен знаходиться вище верхньої пунктирної лінії, необхідно обрати формувач ясен більшої висоти; якщо нижче нижньої пунктирної лінії — меншої висоти.

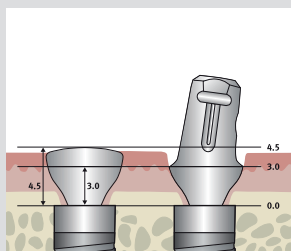

Вибір формувача ясен відповідно до абатмента

- Формувач ясен і постійний абатмент мають належати до однієї ортопедичної лінійки і мати однакову висоту ясен.
- Наведений вище опис висоти формувача ясен (GH 3,0) відноситься тільки до ділянки від рівня з'єднання до краю коронки.


- Загальна висота формувача ясен завжди приблизно на 1,5 мм більше номінальної висоти, якщо рахувати від рівня з'єднання (в даному випадку загальна висота складає 4,5 мм), що також дозволяє задати форму для нижньої частини профілю коронки.

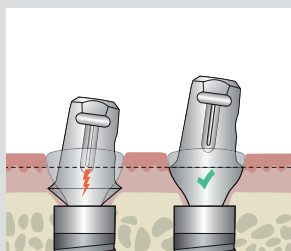


Якщо сформований отвір в м'яких тканинах менше за профіль абатмента, що застосовується, це може призвести до компресії тканин ясен, якої можна уникнути. Так відбувається, коли:

1. Формувач ясен значно вище рівня ясен і абатмента, котрий потім буде використовуватися..

- Формувач ясен відповідає висоті ясен, однак висота ясен постійного абатмента нижче, ніж у використаного формувача ясен (див. малюнок).
- Діаметр постійного абатмента більше, ніж у використаного формувача ясен (наприклад, коли вони належать до різних ортопедичних лінійок).

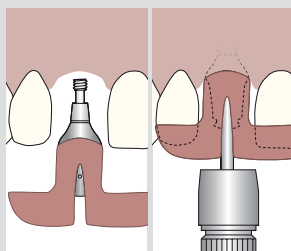

Під час перенесення положення неіндексованого кінцевого з'єднання ключ перенесення допомагає зберегти точне положення абатмента в імплантаті.

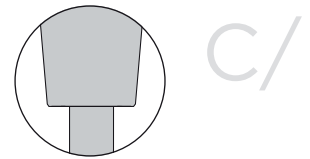

Зняття відбитків C/ (без індексу) З РІВНЯ ІМПЛАНТАТА

Трансфер Ankylos Balance C/⁶

Гвинт для трансфера Ankylos Balance C/ ⁶

Трансфер Ankylos Balance C/

- Для перенесення положення імплантата на робочу модель методом відкритої ложки.

Масштаб 1,2:1



короткий



довгий



короткий



довгий

Арт.	3104 5410	3104 5412	3104 5400	3104 5402
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Трансфер Ankylos Balance C/⁶

Трансфер Ankylos Balance C/ вузький⁶

Трансфер Ankylos Balance C/

- Підходить для процедур з використанням методу закритої ложки.

Масштаб 1,2:1



Арт.	3104 5415	3104 5416
------	-----------	-----------

ІНСТРУМЕНТИ

Вкручування гвинтів для трансфера і трансферів:


Вручну. За необхідності гвинти можна ослабити за допомогою шестигранної викрутки 1,0 мм.

Аналог А-імплантата Ankylos Balance C/⁶

Масштаб 1,2:1



Арт.	3104 5270
------	-----------

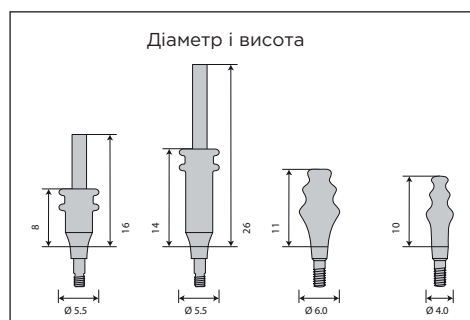

Regular C/

ШИРОКІ АБАТМЕНТИ ПІД КОРОНКИ І МОСТОВИДНІ КОНСТРУКЦІЇ

Формувач ясен Ankylos Regular C/X

- Для простого формування контуру м'яких тканин навколо імплантата.
- Вибір відповідно до ясенного краю.

Формувач ясен Ankylos Regular C/X⁴

Масштаб 1,2:1



GH 0,75



GH 1,5



GH 3,0



GH 4,5

Арт.	3102 4010	3102 4012	3102 4014	3102 4016
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Перенесення з рівня імплантата:

Трансфер Balance C/

Компонент для зняття відбитків з рівня абатмента / перенесення з рівня абатмента:

Ковпачок 3 в 1 в якості ковпачка для відбитків (тільки для кута 0-22,5°)

Ковпачок 3 в 1 Ankylos Regular C/X

- Для перенесення положення ортопедичного абатмента під час виготовлення відбитків з вже встановлених в імплантати абатментів Ankylos Regular C/X.
- Для виготовлення тимчасової реставрації з фіксацією замиканням в присутності пацієнта (тільки на необточених абатментах).
- В якості моделювального ковпачка на аналогах абатментів.

Ковпачок 3 в 1 Ankylos Regular C/X²⁰

Масштаб 1,2:1



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5

Арт.	3104 7120	3104 7121	3104 7122	3104 7123
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Аналог абатмента Ankylos Regular C/X

- Для фіксації ортопедичних компонентів після виготовлення відбитка за допомогою ковпачка 3 в 1.

Аналог абатмента Ankylos Regular C/X⁶

Масштаб 1,2:1



A 0



A 7,5





A 15



A 22,5

Арт.	3104 7110	3104 7111	3104 7112	3104 7113
------	-----------	-----------	-----------	-----------

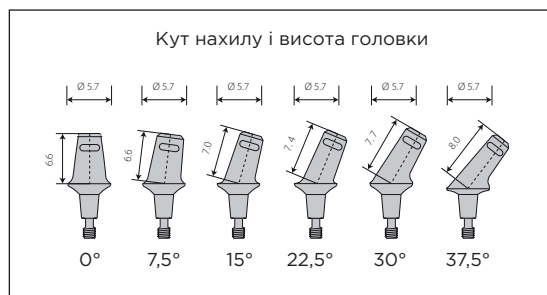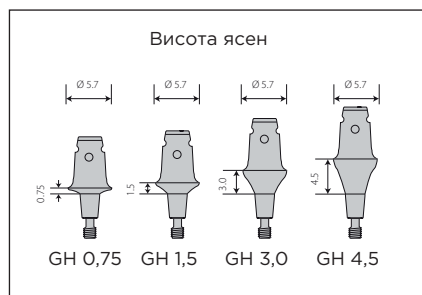

Абатмент Ankylos Regular C/⁴

Высота ясен 0,75



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5



A 30



A 37,5

Арт.

3102 4150

3102 4151

3102 4152

3102 4153

3102 4154

3102 4155

Абатмент Ankylos Regular C/

- Легко адаптувати залежно від клінічної ситуації завдяки наявності чотирьох варіантів висоти ясен і до шести варіантів кута нахилу.
- Можна індивідуалізувати за допомогою шліфування.
- Можливість цементної і латеральної гвинтової фіксації, а в випадку A 30 і A 37,5 — також і оклюзійної гвинтової фіксації.
- Геометрія конічного з'єднання для встановлення практично в будь-якому положенні.

Высота ясен 1,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5



A 30

Арт.

3102 4160

3102 4161

3102 4162

3102 4163

3102 4164

Высота ясен 3,0



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5

Арт.

3102 4170

3102 4171

3102 4172

3102 4173

Латеральний
фіксаційний
шестигранний
гвинт Ankylos
M 1,4⁴



3105 6301

Горизонтальне
посадочне кільце
для фіксаційного
гвинта Ankylos
M 1,41⁴



3105 6304

Высота ясен 4,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5

Арт.

3102 4180

3102 4181

3102 4182

3102 4183

ІНСТРУМЕНТИ**Встановлення абатментів Ankylos Regular C/:**

Шестигранна викрутка 1,0 мм,
рекомендований момент сили 15 Нсм

Фіксація реставрації за допомогою латерального фіксаційного гвинта (тільки A 30 і 37,5):

Шестигранна викрутка 1,0 мм,
рекомендований момент сили 10 Нсм

Balance Posterior C/

ВУЗЬКІ АБАТМЕНТИ ПІД КОРОНКИ І МОСТОВИДНІ КОНСТРУКЦІЇ

Формувач ясен

Ankylos Balance Posterior C/

- Для простого формування контуру м'яких тканин навколо імплантата.
- Вибір відповідно до ясенного краю.

Формувач ясен Ankylos Balance Posterior C/ ⁴

Масштаб 1,2:1



GH 0,75



GH 1,5



GH 3,0



GH 4,5

ІНСТРУМЕНТИ


Встановлення формувачів ясен:

Шестигранна викрутка 1,0 мм

Перенесення з рівня імплантата:


Трансфер Balance C/

Висота ясен

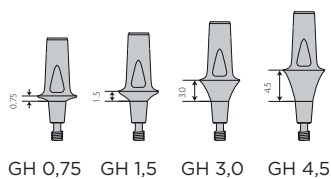

GH 0,75 GH 1,5 GH 3,0 GH 4,5

Кут нахилу і висота головки

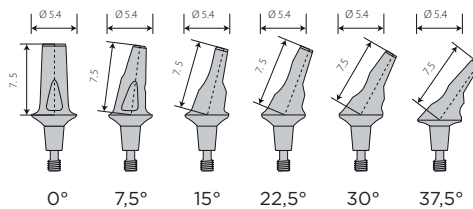

0° 7,5° 15° 22,5° 30° 37,5°

Абатмент Ankylos Balance Posterior C/ ⁴

Висота ясен 0,75



Масштаб 1,2:1

Нахил



прямий



7,5°



15°



22,5°



30°



37,5°

Арт.

3102 1625

3102 1647

3102 1648

3102 1652

3102 1654

3102 1659

Абатмент Ankylos Balance Posterior C/

- Для коронок и мостовидных протезів у боковому відділі.
- Легко адаптувати залежно від клінічної ситуації завдяки наявності чотирьох варіантів висоти ясен і до шести варіантів кута нахилу.
- Можна індивідуалізувати за допомогою шліфування.
- Цементна або латеральна гвинтова фіксація.
- Геометрія кінцевого з'єднання для встановлення практично в будь-якому положенні.

Висота ясен 1,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



прямий



7,5°



15°



22,5°



30°

Арт.

3102 1630

3102 1649

3102 1650

3102 1653

3102 1655

Висота ясен 3,0



Масштаб 1,2:1

Нахил



прямий



15°

Арт.

3102 1640

3102 1660

Латеральний
ретенційний
шестигранний
гвинт Ankylos
M 1 x 0,2°



3105 6051

Гільза
для латерального
ретенційного
шестигранного
гвинта Ankylos¹⁴



3105 6052

Висота ясен 4,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



прямий



15°

Арт.

3102 1645

3102 1665

ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення абатментів Ankylos Balance C/:

Шестигранна викрутка 1,0 мм,
рекомендований момент сили 15 Нсм

Фіксація реставрації за допомогою
латерального ретенційного гвинта:

Шестигранна викрутка 1,0 мм,
рекомендований момент сили 10 Нсм

Balance Anterior C/

АНАТОМІЧНІ АБАТМЕНТИ ДЛЯ ПЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛУ

Формувач ясен Ankylos Balance C/

- Для простого формування контуру м'яких тканин навколо імплантата.
- Вибір відповідно до ясенного краю.

ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення формувачів ясен:

Шестигранна викрутка 1,0 мм

Формувач ясен Ankylos Balance C/ ⁴

Гвинт для формувача ясен ⁴

Масштаб 1,2:1						
Назва	1,5 маленький	3,0 маленький	1,5 великий	3,0 великий	1,5	3,0
Арт.	3102 1510	3102 1515	3102 1520	3102 1525	3102 1505	3102 1507

Перенесення з рівня імплантата

Трансфер C/

Тимчасовий абатмент Ankylos Balance C/



- Для виготовлення високоестетичних тимчасових коронок і мостовидних протезів.
- Легко адаптувати відповідно до клінічної ситуації завдяки наявності двох варіантів діаметра, двох варіантів висоти ясен і двох варіантів кута нахилу.
- Легко використовувати завдяки борозні для фіксації тимчасового протеза.
- Міцність та рентгеноконтрастність завдяки додаванню діоксиду цирконію.

Зверніть увагу, що максимальний термін носіння складає 6 місяців.

Тимчасовий абатмент Ankylos Balance C/ ^{4/24/32}

Масштаб 1,2:1				
Назва	маленький / 1,5 / прямий Ø 5,5 / В 6,0	маленький / 3,0 / прямий Ø 5,5 / В 6,0	великий / 1,5 / прямий Ø 7 / В 7,5	великий / 3,0 / прямий Ø 7 / В 7,5
Арт.	3102 3311	3102 3316	3102 3351	3102 3356

Масштаб 1,2:1				
Назва	маленький / 1,5 / 15° Ø 5,5 / В 6,5	маленький / 3,0 / 15° Ø 5,5 / В 6,5	великий / 1,5 / 15° Ø 7 / В 7,5	великий / 3,0 / 15° Ø 7 / В 7,5
Арт.	3102 3331	3102 3336	3102 3371	3102 3376

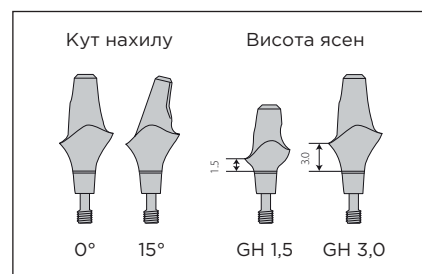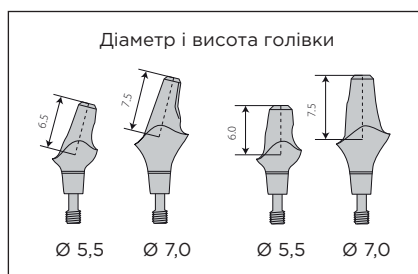

Абатмент Ankylos Balance Anterior C/⁴

Масштаб 1,2:1

Назва	малий / 1,5 / прямий Ø 5,5 / В 6,0	малий / 3,0 / прямий Ø 5,5 / В 6,0	великий / 1,5 / прямий Ø 7 / В 7,5	великий / 3,0 / прямий Ø 7 / В 7,5
Арт.	3102 1550	3102 1560	3102 1570	3102 1580

Абатмент Ankylos Balance Anterior C/

- Для високоестетичних одиничних коронок і мостовидних протезів у передньому відділі.
- Легко адаптувати відповідно до клінічної ситуації завдяки наявності двох варіантів діаметра, двох варіантів висоти ясен і двох варіантів кута нахилу.
- Можна індивідуалізувати за допомогою шліфування.
- Цементна або латеральна гвинтова фіксація
- **Геометрія кінцевого з'єднання для встановлення практично в будь-якому положенні.**



Масштаб 1,2:1

Назва	малий / 1,5 / 15° Ø 5,5 / В 6,5	малий / 3,0 / 15° Ø 5,5 / В 6,5	великий / 1,5 / 15° Ø 7 / В 7,5	великий / 3,0 / 15° Ø 7 / В 7,5
Арт.	3102 1590	3102 1600	3102 1610	3102 1620

Абатмент Ankylos Cercon Balance C/^{32/4}

Масштаб 1,2:1

Назва	малий / 1,5 / прямий Ø 5,5 / В 6,0	малий / 3,0 / прямий Ø 5,5 / В 6,0	великий / 1,5 / прямий Ø 7 / В 7,5	великий / 3,0 / прямий Ø 7 / В 7,5
Арт. ☐ нейтральний	3102 3010	3102 3015	3102 3050	3102 3055
Арт. ☐ дентин	3102 3310	3102 3315	3102 3350	3102 3355

Абатмент Ankylos Cercon Balance C/

- Для керамічних коронок, що практично не відрізняються від справжніх зубів, у передньому відділі.
- Надзвичайно міцні, з діоксиду цирконію.
- Легко адаптувати відповідно до клінічної ситуації завдяки наявності двох варіантів діаметра, двох варіантів висоти ясен і двох варіантів кута нахилу.
- Абатменти великого розміру можна індивідуалізувати за допомогою шліфування.
- Два відтінки: нейтральний і дентин.
- Неперевершена естетика з прекрасною світлопередачею.
- **Геометрія кінцевого з'єднання для встановлення практично в будь-якому положенні.**



Масштаб 1,2:1

Назва	малий / 1,5 / 15° Ø 5,5 / В 6,5	малий / 3,0 / 15° Ø 5,5 / В 6,5	великий / 1,5 / 15° Ø 7 / В 7,5	великий / 3,0 / 15° Ø 7 / В 7,5
Арт. ☐ нейтральний	3102 3030	3102 3035	3102 3070	3102 3075
Арт. ☐ дентин	3102 3330	3102 3335	3102 3370	3102 3375

Будь ласка, зауважте, що ці абатменти призначені тільки для реставрації одиничних зубів у передньому відділі.

TitaniumBase C/

МЕТАЛЕВА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КЕРАМІЧНИХ АБАТМЕНТІВ

Платформа Ankylos TitaniumBase

- Для виготовлення керамічних абатментів з максимально індивідуалізованим дизайном.
- Має стандартне з'єднання імплантат-абатмент і адгезивну поверхню для приклеювання індивідуально виготовленого керамічного абатмента.
- Дві плоскі грані, що запобігають ротації.
- З індексом або геометрією конічного з'єднання на ваш вибір.

Платформа Ankylos TitaniumBase ⁴



Масштаб 1,2:1

Назва



/ C



/ C висока

Арт.	3102 2642	3102 2652	3102 2644	3102 2654
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Платформа Ankylos ScanBase ^{24, 4}




/ C



/ C висока

Платформа Ankylos ScanBase

- Для сканування геометрії абатмента.
- Дизайн той самий, що і в TitaniumBase; виготовлено з РЕЕК (пластик); можна використовувати спрей або порошок для сканування.
- Підходить для всіх звичайних дентальних сканерів.

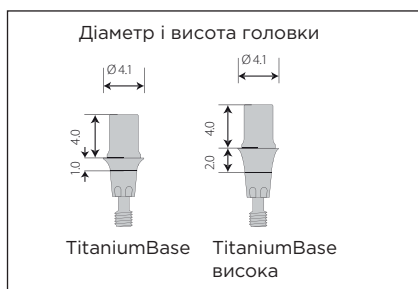

Atlantis® —

МАКСИМАЛЬНО ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІ ОРТОПЕДИЧНІ РІШЕННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CAD/CAM ДЛЯ АБАТМЕНТІВ, БАЛОК І МОСТОВИДНИХ ПРОТЕЗІВ



Щоб результат був більш природним, індивідуалізовані CAD/CAM абатменти Atlantis розробляють за унікальною технологією за допомогою програмного забезпечення Atlantis VAD (Virtual Abutment Design, віртуальне проектування абатмента) і виготовляють, застосовуючи надсучасний процес фрезерування. Виготовлення абатментів Atlantis можливе з титану, титану золотистого відтінку або з діоксиду цирконію.

Виробництво супраструктур Atlantis здійснюється з застосуванням останніх розробок в сфері CAD/CAM технологій на основі досвіду комп'ютеризованого виробництва і виробництва медичних виробів зокрема. Виготовлення супраструктур Atlantis можливе з титану або з кобальт-хромового сплаву.

Замовлення Atlantis здійснюється онлайн через Atlantis WebOrder:
www.atlantisweborder.com.

За більш детальною інформацією звертайтеся до місцевого представника компанії Dentsply Sirona Implants.



Balance Base C/, концепція SmartFix[®]

ОКЛЮЗІЙНІ МОСТОВИДНІ ПРОТЕЗИ З ГВИНТОВОЮ ФІКСАЦІЄЮ, БАЛКИ

Формувач ясен Ankylos C/ D 4,2⁴

				
Масштаб 1,2:1	GH 0,75	GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5
Арт.	3102 2510	3102 2512	3102 2514	3102 2516

Захисний ковпачок Ankylos для вузького абатмента Balance Base

- Для формування контуру м'яких тканин навколо вузького абатмента Balance Base C/.
- Для закриття вузького абатмента Base в ротовій порожнині пацієнта на лабораторному етапі.

Лабораторний аналог вузького абатмента Ankylos Balance Base⁴

Масштаб 1,2:1			
Арт.	3104 5332	3102 2590	3105 6212

Захисний ковпачок Ankylos для вузького абатмента Balance Base⁴

Золотий ковпачок Ankylos для абатмента Balance Base (Permador[®] PDF)¹¹

Ретенційний ковпачок Ankylos для вузького абатмента Balance Base

- Для спрощення перенесення з рівня абатмента.
- Використовується для методу відкритої ложки з оклюзійним фіксаційним гвинтом 3105 6025 або 3105 6026.

Ретенційний ковпачок Ankylos для вузького абатмента Balance Base⁴

Масштаб 1,2:1				
Арт.	3105 6216	3105 6217	3105 6218	3104 5322

Довгий ретенційний ковпачок Ankylos для вузького абатмента Balance Base⁴

Титановий ковпачок Ankylos для вузького абатмента Balance Base³


Моделювальний ковпачок Ankylos для вузького абатмента Balance Base²⁰

Стандартні ковпачки для абатмента Ankylos Balance Base C/

- Для простого виготовлення ортопедичних реставрацій без зміни абатментів в ротовій порожнині пацієнта.
- Через накладання різьби з ковпачками для вузького абатмента Balance Base можна використовувати тільки оклюзійні фіксаційні гвинти 3105 6022/24/25.

Головка абатмента для кутового абатмента Balance Base C/^{4, 24} (запасна деталь)

Масштаб 1,2:1	
Арт.	3102 2570

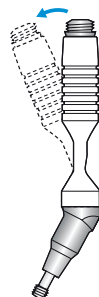

Кутовий абатмент Balance Base C/ для концепції SmartFix

Для надійності компоненти абатмента попередньо зафіксовано на імплантоводі. Короткий і гнучкий імплантовод полегшує встановлення кутового абатмента Balance Base, особливо за умов обмеженого доступу.

Абатмент Ankylos Balance Base C/ вузький^{4, 24} (кутовий варіант)

Висота ясен 0,75



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0

Арт.

3102 2520

Висота ясен 1,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0

Арт.

3102 2530

Висота ясен 3,0



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 15



A 30

Арт.

3102 2540

3102 2542

3102 2546

Висота ясен 4,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 15



A 30

Арт.

3102 2550

3102 2552

3102 2556

Шестигранний оклюзійний фіксаційний гвинт Ankylos М 1,6 мм⁴

Масштаб 1,2:1



короткий
(анодований
у синій колір)



довгий
(на одному рівні
з ковпачком)



екстра-довгий
(подовжує короткий
ковпачок на 5 мм)



19 мм
(подовжує довгий
ковпачок на 5 мм)

Арт.

3105 6022

3105 6024

3105 6025


3105 6026

Абатмент Ankylos Balance Base C/ вузький

- Для ретенції покривних протезів на балочних конструкціях.
- Також підходять для простого виготовлення мостовидних протезів з гвинтовою фіксацією.
- Основа для покривних і мостовидних CAD/CAM протезів з фіксацією на балках.
- Фіксуються тільки оклюзійними гвинтами.

Примітка

Абатменти Balance Base використовуються виключно попарно і не підходять для супраструктур з цементною фіксацією. Реставрації одиничних зубів протипоказані.

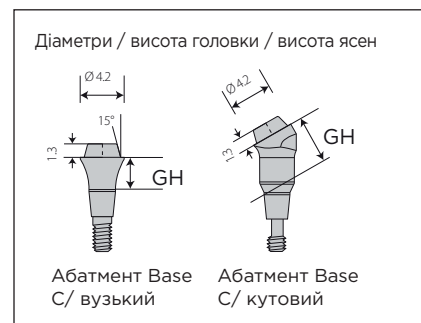

ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення вузьких абатментів Ankylos Balance Base C/:

Прямий абатмент:
шестигранна насадка для ортопедичного ключа-тріскачки 1,8 мм, рекомендований момент сили 25 Нсм

Кутовий абатмент, тіло абатмента:
шестигранна насадка для ортопедичного ключа-тріскачки 1,0 мм, рекомендований момент сили 15 Нсм

Кутовий абатмент, головка абатмента:
шестигранна насадка для ортопедичного ключа-тріскачки 1,8 мм, рекомендований момент сили 25 Нсм

Вкручування оклюзійних фіксаційних / ретенційних гвинтів

Шестигранна викрутка 1,0 мм, рекомендований момент сили 10 Нсм

Також передбачено фінішери для припасування ортопедичних реставрацій в лабораторії.

SynCone® C/

БЕЗЗУБА ЩЕЛЕПА, СТАНДАРТНІ КОНІЧНІ КОРОНКИ

Ankylos SynCone 5°

Кут конусності — 5°

- Єдина геометрія головок для нижньої і верхньої щелеп.
- Відсутність залежності від кількості імплантатів.

Додаткові варіанти кута нахилу

- 7,5° для більш точного вирівнювання на нижній щелепі.
- 22,5° і 30° спеціально для верхньої щелепи.
- Всі кути доступні з будь-якою висотою ясен для більшої гнучкості.

Паралельна направляюча з допоміжним елементом обертання

- Стандартний ключ для позиціонування можна зафіксувати в стрижні для більш простого вирівнювання абатментів за допомогою паралельної направляючої.

Конусний ковпачок

без ретенційних елементів

- Ковпачок для цементної фіксації на металевий каркас.

Гвинт-заглушка для прямого абатмента

- Застосовується для закриття шахти гвинта замість полімеру.

Формувач ясен Ankylos C/ D 4,2⁴

				
Масштаб 1,2:1	GH 0,75	GH 1,5	GH 3,0	GH 4,5
Арт.	3102 2510	3102 2512	3102 2514	3102 2516

Зняття відбитка




Для негайного навантаження відбиток не знімають.

На імплантатах після загоєння відіток знімають з рівня імплантату

Трансфер Balance C/

Для заміни довготривалого тимчасового рішення на постійну реставрацію відіток знімають з рівня абатмента

Ретенційний конусний ковпачок SynCone використовують в якості ковпачка для відбитків.

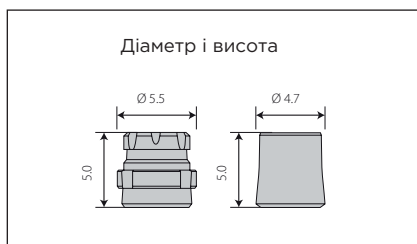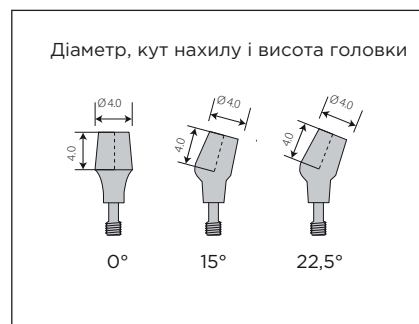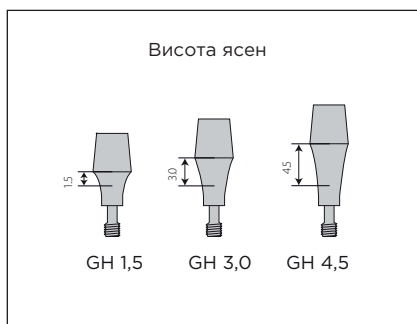

Абатмент Ankylos SynCone C/⁴

Висота ясен 1,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5



A 30

Арт.	3102 2110	3102 2112	3102 2114	3102 2116	3102 2118
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Висота ясен 3,0



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5



A 30

Арт.	3102 2120	3102 2122	3102 2124	3102 2126	3102 2128
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Висота ясен 4,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5



A 30

Арт.	3102 2130	3102 2132	3102 2134	3102 2136	3102 2138
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Гвинт-заглушка Ankylos для прямого абатмента SynCone C/ 5°

Масштаб 1,2:1



Арт.	3105 6280	3102 2198	3102 2199
------	-----------	-----------	-----------

Конусний ковпачок Ankylos Degulor® для SynCone 5°з ретенційними
елементамибез ретенційних
елементів**Паралельна направляюча Ankylos для SynCone⁴**

Масштаб 1,2:1

**Гільза для полімеризації Ankylos для SynCone²⁶**

Арт.	3103 3611	3102 1405
------	-----------	-----------

Абатмент Ankylos SynCone C/

- Для протезування нижньої щелепи при повній адентії з негайним навантаженням на протез, що опирається на чотири конічних імплантати, встановлені між підборідними отворами.
- Для відстроченого навантаження на нижній і верхній щелепах — в якості стандартного ретенційного елемента для протеза.
- Прямі і кутові, два варіанти висоти ясен, до п'яти варіантів кута нахилу.
- Геометрія конічного з'єднання для встановлення практично в будь-якому положенні.

Конусний ковпачок Ankylos Degulor® для SynCone C/

- Для абатментів з конусністю голівки 5°. З ретенційними елементами для негайної реставрації, без ретенційних елементів — для спрощення процедури виготовлення протезів з металевим каркасом при відстроченій реставрації.

ІНСТРУМЕНТИ**Встановлення абатментів Ankylos SynCone C/:**

Шестигранна викрутка 1,0 мм, рекомендований момент сили 15 Нсм


Паралельне вирівнювання абатментів:

Паралельна направляюча для SynCone

Кульковий замок C/ БЕЗЗУБА ЩЕЛЕПА, СТАНДАРТНІ РЕТЕНЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ

Абатмент Ankylos з кульковим замком C/

- Покривні протези з опорою на два імплантата на нижню щелепу без зубів.
- Виготовлення реставрації у присутності пацієнта або в лабораторії.
- Діаметр кулькового замка складає 2,7 мм.

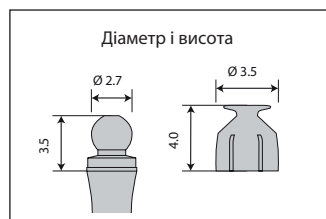

ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення кулькових замків Ankylos:

Насадка для фіксації кулькового замка, рекомендований момент сили 25 Нсм

Активация/деактивация матриці для кулькового замка:

Інструмент для активції/деактивції матриці для кулькового замка

Абатмент Ankylos з кульковим замком C/4



Масштаб 1,2:1



a / 1,5



a / 3,0



a / 4,5

Арт. с матрицей	3102 1300	3102 1310	3102 1320
Арт. без матрицы	3102 1301	3102 1311	3102 1321

Матрица Ankylos для кулькового замка¹⁴

Масштаб 1,2:1



Силиконове кільце Ankylos²⁶ (запасна деталь)

Лабораторний аналог Ankylos⁶ абатмента з кульковим замком

Арт.	3102 1312	3102 1313	3104 5220
------	-----------	-----------	-----------

Ортопедичні реставрації за умов екстремально тонкого типу ясен

Компоненти Ankylos з нульовою висотою ясен

- Для реставрацій за умов екстремально тонкої слизової оболонки.

Формувач ясен Ankylos 0,0⁴

Масштаб 1,2:1



для
А-імплантів



для
В-імплантів



для
С-імплантів



для формувача
ясен 0,0

Арт.	3102 1451	3102 1452	3102 1454	3102 1431
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Шестигранный центральный гвинт Ankylos

Абатмент Ankylos Balance Posterior C/4

Масштаб 1,2:1



0,0 / прямой



для
А-імплантів



для
В-імплантів



для
С-імплантів



для
D-імплантів

Аналог имплантата Ankylos Regular C/X⁶

Арт.	3102 1445	3104 7011	3104 7012	3104 7013	3104 7014
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Locator® C/

БЕЗЗУБА ЩЕЛЕПА, СТАНДАРТНІ РЕТЕНЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ

Абатмент Ankylos Locator C/⁴⁰

Масштаб 1,2:1

GH 2

GH 3

GH 4

GH 5

GH 6

Арт.	3102 2610	3102 2612	3102 2614	3102 2616	3102 2618
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ankylos Locator C/

- Повні покривні протези на двох імплантатах.
- Самовирівнювання для легкої фіксації в ротовій порожнині простим замиканням.
- Невелика загальна висота для більшої свободи дій в умовах обмеженого доступу.
- Гнучкість індивідуального підбору ступеня ретенції і компенсації розходження осей імплантатів.

Змінні патриці Locator⁴¹ (4 шт.)

Масштаб 1,2:1



прозора, сильна ретенція

рожева, слабка ретенція

синя, дуже слабка ретенція

розширений спектр: сіра, нульова ретенція

розширений спектр: зелена, сильна ретенція

розширений спектр: помаранчева, слабка ретенція

розширений спектр: червона, дуже слабка ретенція

Арт.	45 - 3349	45 - 3350	45 - 3351	45 - 3360	45 - 3352	45 - 3353	45 - 3354
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ковпачки для відбитків Locator⁴² (4 шт.)

Масштаб 1,2:1



Набір аттачментів Locator (склад: по 2 шт. кожного)

Титан⁴³Нержавіюча сталь⁴⁴Матричні аналоги Locator⁴⁵ (4 шт.) D 4

Склад набору аттачментів Locator:

- 2 матриці
- 2 спейсерних кільця
- 2 змінні прозорі патриці, сильна ретенція
- 2 змінні рожеві патриці, слабка ретенція
- 2 змінні сині патриці, дуже слабка ретенція

Арт.	45 - 3355	45 - 3347	45 - 3348	45 - 3356
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Чорні робочі змінні патриці Locator⁴⁶ (4 шт.)

Масштаб 1,2:1

Спейсерні кільця Locator⁴⁷ (20 шт.)Спейсерні ковпачки Locator⁴⁸ (4 шт.)Гільза тримача абатмента Locator⁵⁰ (4 шт.)

Арт.	45 - 3358	45 - 3359	45 - 3361	45 - 3341
------	-----------	-----------	-----------	-----------

4-компонентна викрутка Locator⁴⁹

Зменшений масштаб

Насадка Ankylos для ортопедичного ключа-тріскачки⁶ для LocatorКутомір Locator⁵¹Штифти Locator для перевірки паралельності осей⁴⁶ (4 шт.)

Арт.	45 - 3340	3103 3635	45 - 3345	45 - 3346
------	-----------	-----------	-----------	-----------



ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення абатментів Locator:

3-компонентний інструмент для встановлення Locator або насадка Ankylos для ортопедичного ключа-тріскачки для Locator.

Standard C/

КОРОНКИ І МОСТОВИДНІ КОНСТРУКЦІЇ З РІВНЯ АБАТМЕНТА

Формувач ясен Ankylos Standard C/

- Для простого формування контуру м'яких тканин навколо імплантата.
- Підбираються відповідно до висоти ясен і запланованого діаметра абатмента а або b.

ІНСТРУМЕНТИ




Встановлення формувачів ясен:

Шестигранна викрутка 1,0 мм

Формувач ясен Ankylos Standard C/4

Масштаб 1,2:1

Назва	а / 1,5 компактний	а / 3,0 компактний	а / 4,5 компактний	а / 6,0 компактний	b / 1,5 компактний	b / 3,0 компактний
Арт.	3102 1011	3102 1021	3102 1026	3102 1028	3102 1031	3102 1041

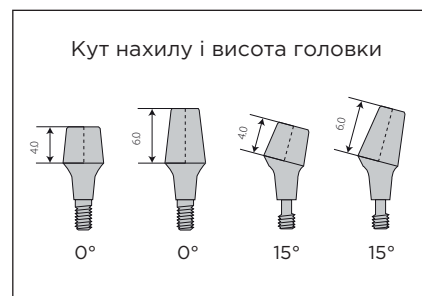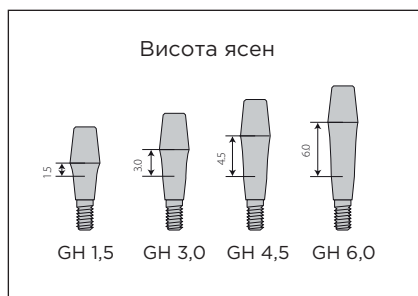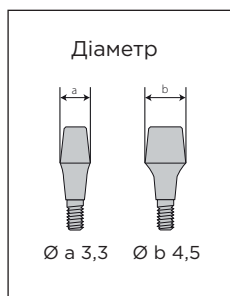

Абатмент Ankylos Standard C/⁴

Прямі абатменти

Прямі абатменти Standard встановлюють за допомогою ключа для фіксації абатментів а і b. Супраструктури фіксують оклюзійним гвинтом М 1,6.



Масштаб 1,2:1



Назва а / 1,5 / 4,0 а / 1,5 / 6,0 а / 3,0 / 4,0 а / 4,5 / 4,0 а / 6,0 / 4,0 а / 3,0 / 6,0

Арт.	3102 1050	3102 1060	3102 1070	3102 1076	3102 1078	3102 1080
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Масштаб 1,2:1



Назва б / 1,5 / 4,0 б / 1,5 / 6,0 б / 3,0 / 4,0 б / 3,0 / 6,0

Арт.	3102 1090	3102 1100	3102 1110	3102 1120
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Кутові абатменти

Абатменти 15° Standard фіксують у потрібному положенні за допомогою ключа для позиціонування кутових абатментів і затягують, застосовуючи до стяжного гвинта зусилля 15 Нсм. Викрутка: 1,0 мм шестигранна. Супраструктури фіксують за допомогою латерального ретенційного шестигранного гвинта М1 х 0,2.



Масштаб 1,2:1



Назва а / 1,5 / 4,0 15° а / 1,5 / 6,0 15° а / 3,0 / 4,0 15° а / 3,0 / 6,0 15°

Арт.	3102 1130	3102 1140	3102 1150	3102 1160
------	-----------	-----------	-----------	-----------



Масштаб 1,2:1



Назва б / 1,5 / 4,0 15° б / 1,5 / 6,0 15° б / 3,0 / 4,0 15° б / 3,0 / 6,0 15°

Арт.	3102 1170	3102 1180	3102 1190	3102 1200
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Абатмент Ankylos Standard C/

- Гнучкість застосування завдяки наявності різних розмірів і двох варіантів кута нахилу.
- Підбір абатмента «в кріслі», абатменти залишаються в ротовій порожнині пацієнта.
- Спрощена процедура зняття відбитка і примірки каркаса.
- Цементна або гвинтова фіксація (оклюзійна для прямих абатментів, латеральна - для кутових).

ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення прямих абатментів Ankylos Standard C/:

Ключ для фіксації абатментів а і b, рекомендований момент сили 25 Нсм

Встановлення кутових абатментів Ankylos Standard C/:

Шестигранна викрутка 1,0 мм, рекомендований момент сили 15 Нсм

Фіксація коронок і мостовидних протезів за допомогою оклюзійного або латерального ретенційного гвинта:

Шестигранна викрутка 1,0 мм, рекомендований момент сили 10 Нсм

Standard C/

КОРОНКИ И МОСТОВИДНІ КОНСТРУКЦІЇ З РІВНЯ АБАТМЕНТА

Ковпачок для відбитків Ankylos Standard

- Для перенесення положення абатмента на робочу модель.
- Фіксується на абатменті за рахунок ретенції, на прямих абатментах також за допомогою довгого моделювального гвинта (зняття відбитка методом відкритої ложки).



Примітка:
Використовуючи абатменти 15°, необхідно вирівнювати плоску сторону (1) трансфера з латеральною різьбою (2).

Ковпачок для відбитків Ankylos Standard²⁷

Масштаб 1,2:1



a / 1,5 / 4,0
a / 3,0 / 4,0



a / 1,5 / 6,0
a / 3,0 / 6,0



b / 1,5 / 4,0
b / 3,0 / 4,0



b / 1,5 / 6,0
b / 3,0 / 6,0


Арт.

3104 5011

3104 5021

3104 5031

3104 5041

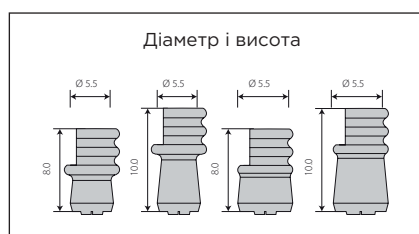

Тимчасовий ковпачок Ankylos Standard

- Для простого та швидкого виготовлення тимчасових компонентів на прямих і кутових абатментах Standard.
- Виготовлення в присутності пацієнта або в лабораторії.

Тимчасовий ковпачок Ankylos Standard²⁰

Масштаб 1,2:1



a / 1,5 / 4,0
a / 3,0 / 4,0



a / 1,5 / 6,0
a / 3,0 / 6,0



b / 1,5 / 4,0
b / 3,0 / 4,0



b / 1,5 / 6,0
b / 3,0 / 6,0

Арт.

3104 5280

3104 5290

3104 5300

3104 5310

Лабораторний аналог абатмента Ankylos Standard суцільний

- Лабораторне виготовлення конструкцій з опорою на імплантати на основі системи Standard.
- Для фіксації золотих ковпачків у моделі для паяння.

Лабораторний аналог абатмента Ankylos Standard⁶ суцільний

Масштаб 1,2:1



a / 1,5 / 4,0
a / 3,0 / 4,0
прямий



a / 1,5 / 6,0
a / 3,0 / 6,0
прямий



b / 1,5 / 4,0
b / 3,0 / 4,0
прямий



b / 1,5 / 6,0
b / 3,0 / 6,0
прямий

Арт.

3104 5140

3104 5150

3104 5160

3104 5170

Масштаб 1,2:1



a / 1,5 / 4,0
a / 3,0 / 4,0
15°



a / 1,5 / 6,0
a / 3,0 / 6,0
15°



b / 1,5 / 4,0
b / 3,0 / 4,0
15°



b / 1,5 / 6,0
b / 3,0 / 6,0
15°

Арт.


3104 5142

3104 5152

3104 5162

3104 5172

Моделювальний ковпачок Ankylos Standard²⁰ прямий і 15°, для одиничних коронок

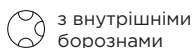

з внутрішніми
борознами



Масштаб 1,2:1 а / 1,5 / 4,0
а / 3,0 / 4,0



а / 1,5 / 6,0
а / 3,0 / 6,0



б / 1,5 / 4,0
б / 3,0 / 4,0




б / 1,5 / 6,0
б / 3,0 / 6,0

Арт.	3104 5180	3104 5190	3104 5200	3104 5210
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Моделювальний ковпачок Ankylos Standard

- Для моделювання одиничних коронок на прямих і кутових абатментах Standard.
- Оклюзійний і латеральний отвори для супраструктур з гвинтовою фіксацією.
- Ребриста поверхня для запобігання ротації.
- Також підходить для реставрацій з цементною фіксацією.

Моделювальний ковпачок Ankylos Standard²⁰ прямий і 15°, для мостовидних протезів

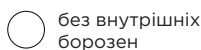

без внутрішніх
борозен



Масштаб 1,2:1 а / 1,5 / 4,0
а / 3,0 / 4,0



а / 1,5 / 6,0
а / 3,0 / 6,0



б / 1,5 / 4,0
б / 3,0 / 4,0



б / 1,5 / 6,0
б / 3,0 / 6,0

Арт.	3104 5182	3104 5192	3104 5202	3104 5212
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Моделювальний ковпачок Ankylos Standard для мостовидних протезів

- Для виготовлення мостовидних протезів на прямих і кутових абатментах Standard.
- Оклюзійний і латеральний отвори для супраструктур з гвинтовою фіксацією.
- Також підходить для реставрацій з цементною фіксацією.

Золотий ковпачок Ankylos Standard Degunorm®¹²



Масштаб 1,2:1 а / 1,5 / 4,0
а / 3,0 / 4,0



а / 1,5 / 6,0
а / 3,0 / 6,0



б / 1,5 / 4,0
б / 3,0 / 4,0



б / 1,5 / 6,0
б / 3,0 / 6,0

Арт.	3105 6160	3105 6170	3105 6180	3105 6190
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Золотий ковпачок Ankylos Standard

- Для виготовлення балкових конструкцій на прямих абатментах Standard.

Оклюзійний фіксаційний гвинт Ankylos, короткий⁴



Масштаб 1,2:1

Латеральний ретенційний шестигранний вент Ankylos M 1 x 0,2⁶



Гільза для латерального ретенційного шестигранного гвинта Ankylos¹⁴



Гвинт Ankylos для золотого ковпачка 1,6 мм⁴



Арт.	3105 6022	3105 6051	3105 6052	3105 6140
------	-----------	-----------	-----------	-----------

ІНСТРУМЕНТИ

Фіксація коронок і мостовидних протезів за допомогою оклюзійного або латерального фіксаційного гвинта:

Шестигранна викрутка 1,0 мм, рекомендований момент сили 10 Нсм

Фіксація балок за допомогою гвинта для золотого ковпачка:


Пласка викрутка 1,6 мм, рекомендований момент сили 10 Нсм

Ортопедичні концепції /X (з індексом) — огляд

Коронки и мостовидні конструкції	Формувачі ясен	Перенесення з рівня імплантата																		
Balance Anterior /X	 Формувач ясен Balance Anterior C/ <table><tr><td>3102 1510</td><td>1,5 маленький</td></tr><tr><td>3102 1515</td><td>3,0 маленький</td></tr><tr><td>3102 1520</td><td>1,5 великий</td></tr><tr><td>3102 1525</td><td>3,0 великий</td></tr></table>	3102 1510	1,5 маленький	3102 1515	3,0 маленький	3102 1520	1,5 великий	3102 1525	3,0 великий											
3102 1510	1,5 маленький																			
3102 1515	3,0 маленький																			
3102 1520	1,5 великий																			
3102 1525	3,0 великий																			
Regular /X	 Формувач ясен Regular C/X <table><tr><td>3102 4010</td><td>GH 0,75</td></tr><tr><td>3102 4012</td><td>GH 1,5</td></tr><tr><td>3102 4014</td><td>GH 3,0</td></tr><tr><td>3102 4016</td><td>GH 4,5</td></tr></table>	3102 4010	GH 0,75	3102 4012	GH 1,5	3102 4014	GH 3,0	3102 4016	GH 4,5	 <table><tr><td>3104 7040</td><td>Трансфер для методу відкритої ложки короткий</td></tr><tr><td>3104 7042</td><td>Трансфер для методу відкритої ложки довгий</td></tr><tr><td>3104 7044</td><td>Трансфер для методу закритої ложки короткий</td></tr><tr><td>3104 7046</td><td>Трансфер для методу закритої ложки довгий</td></tr><tr><td>3104 7011</td><td>Аналог А-імплантата Regular C/X</td></tr></table>	3104 7040	Трансфер для методу відкритої ложки короткий	3104 7042	Трансфер для методу відкритої ложки довгий	3104 7044	Трансфер для методу закритої ложки короткий	3104 7046	Трансфер для методу закритої ложки довгий	3104 7011	Аналог А-імплантата Regular C/X
3102 4010	GH 0,75																			
3102 4012	GH 1,5																			
3102 4014	GH 3,0																			
3102 4016	GH 4,5																			
3104 7040	Трансфер для методу відкритої ложки короткий																			
3104 7042	Трансфер для методу відкритої ложки довгий																			
3104 7044	Трансфер для методу закритої ложки короткий																			
3104 7046	Трансфер для методу закритої ложки довгий																			
3104 7011	Аналог А-імплантата Regular C/X																			
TitaniumBase /X	Індивідуальні формувчі ясен																			

Абатменти	Перенесення з рівня абатмента, аналог абатмента	Додаткове приладдя	Гвинтова фіксація																																																																
 Balance Anterior /X <table><tr><td>3102 2710</td><td>маленький</td><td>GH 1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 2715</td><td>маленький</td><td>GH 3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 2730</td><td>маленький</td><td>GH 1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 2735</td><td>маленький</td><td>GH 3,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 2750</td><td>великий</td><td>GH 1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 2755</td><td>великий</td><td>GH 3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 2770</td><td>великий</td><td>GH 1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 2775</td><td>великий</td><td>GH 3,0</td><td>A 15</td></tr></table>	3102 2710	маленький	GH 1,5	A 0	3102 2715	маленький	GH 3,0	A 0	3102 2730	маленький	GH 1,5	A 15	3102 2735	маленький	GH 3,0	A 15	3102 2750	великий	GH 1,5	A 0	3102 2755	великий	GH 3,0	A 0	3102 2770	великий	GH 1,5	A 15	3102 2775	великий	GH 3,0	A 15		 Тимчасові абатменти <table><tr><td>3102 3311</td><td>маленький</td><td>1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 3316</td><td>маленький</td><td>3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 3331</td><td>маленький</td><td>1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 3336</td><td>маленький</td><td>3,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 3351</td><td>великий</td><td>1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 3356</td><td>великий</td><td>3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 3371</td><td>великий</td><td>1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 3376</td><td>великий</td><td>3,0</td><td>A 15</td></tr></table>	3102 3311	маленький	1,5	A 0	3102 3316	маленький	3,0	A 0	3102 3331	маленький	1,5	A 15	3102 3336	маленький	3,0	A 15	3102 3351	великий	1,5	A 0	3102 3356	великий	3,0	A 0	3102 3371	великий	1,5	A 15	3102 3376	великий	3,0	A 15	 3105 6301 Латеральний фіксаційний шестигранний гвинт М 1,4  3105 6304 Горизонтальне посадочне кільце для фіксаційного гвинта М 1,4
3102 2710	маленький	GH 1,5	A 0																																																																
3102 2715	маленький	GH 3,0	A 0																																																																
3102 2730	маленький	GH 1,5	A 15																																																																
3102 2735	маленький	GH 3,0	A 15																																																																
3102 2750	великий	GH 1,5	A 0																																																																
3102 2755	великий	GH 3,0	A 0																																																																
3102 2770	великий	GH 1,5	A 15																																																																
3102 2775	великий	GH 3,0	A 15																																																																
3102 3311	маленький	1,5	A 0																																																																
3102 3316	маленький	3,0	A 0																																																																
3102 3331	маленький	1,5	A 15																																																																
3102 3336	маленький	3,0	A 15																																																																
3102 3351	великий	1,5	A 0																																																																
3102 3356	великий	3,0	A 0																																																																
3102 3371	великий	1,5	A 15																																																																
3102 3376	великий	3,0	A 15																																																																
 Regular /X <table><tr><td>3102 4110</td><td>GH 0,75</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 4120</td><td>GH 1,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 4130</td><td>GH 3,0</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 4140</td><td>GH 4,5</td><td>A 0</td></tr><tr><td>3102 4111</td><td>GH 0,75</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 4121</td><td>GH 1,5</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 4131</td><td>GH 3,0</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 4141</td><td>GH 4,5</td><td>A 7,5</td></tr><tr><td>3102 4112</td><td>GH 0,75</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 4122</td><td>GH 1,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 4132</td><td>GH 3,0</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 4142</td><td>GH 4,5</td><td>A 15</td></tr><tr><td>3102 4113</td><td>GH 0,75</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 4123</td><td>GH 1,5</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 4133</td><td>GH 3,0</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 4143</td><td>GH 4,5</td><td>A 22,5</td></tr><tr><td>3102 4114</td><td>GH 0,75</td><td>A 30</td></tr><tr><td>3102 4124</td><td>GH 1,5</td><td>A 30</td></tr><tr><td>3102 4115</td><td>GH 0,75</td><td>A 37,5</td></tr></table>	3102 4110	GH 0,75	A 0	3102 4120	GH 1,5	A 0	3102 4130	GH 3,0	A 0	3102 4140	GH 4,5	A 0	3102 4111	GH 0,75	A 7,5	3102 4121	GH 1,5	A 7,5	3102 4131	GH 3,0	A 7,5	3102 4141	GH 4,5	A 7,5	3102 4112	GH 0,75	A 15	3102 4122	GH 1,5	A 15	3102 4132	GH 3,0	A 15	3102 4142	GH 4,5	A 15	3102 4113	GH 0,75	A 22,5	3102 4123	GH 1,5	A 22,5	3102 4133	GH 3,0	A 22,5	3102 4143	GH 4,5	A 22,5	3102 4114	GH 0,75	A 30	3102 4124	GH 1,5	A 30	3102 4115	GH 0,75	A 37,5	 3104 7120 Ковпачок 3 в 1 Regular C/X A 0 3104 7110 Аналог абатмента Regular C/X A 0 3104 7121 Ковпачок 3 в 1 Regular C/X A 7,5 3104 7111 Аналог абатмента Regular C/X A 7,5 3104 7122 Ковпачок 3 в 1 Regular C/X A 15 3104 7112 Аналог абатмента Regular C/X A 15 3104 7123 Ковпачок 3 в 1 Regular C/X A 22,5 3104 7113 Аналог абатмента Regular C/X A 22,5		 3105 6301 Латеральний фіксаційний шестигранний гвинт М 1,4  3105 6304 Горизонтальне посадочне кільце для фіксаційного гвинта М 1,4							
3102 4110	GH 0,75	A 0																																																																	
3102 4120	GH 1,5	A 0																																																																	
3102 4130	GH 3,0	A 0																																																																	
3102 4140	GH 4,5	A 0																																																																	
3102 4111	GH 0,75	A 7,5																																																																	
3102 4121	GH 1,5	A 7,5																																																																	
3102 4131	GH 3,0	A 7,5																																																																	
3102 4141	GH 4,5	A 7,5																																																																	
3102 4112	GH 0,75	A 15																																																																	
3102 4122	GH 1,5	A 15																																																																	
3102 4132	GH 3,0	A 15																																																																	
3102 4142	GH 4,5	A 15																																																																	
3102 4113	GH 0,75	A 22,5																																																																	
3102 4123	GH 1,5	A 22,5																																																																	
3102 4133	GH 3,0	A 22,5																																																																	
3102 4143	GH 4,5	A 22,5																																																																	
3102 4114	GH 0,75	A 30																																																																	
3102 4124	GH 1,5	A 30																																																																	
3102 4115	GH 0,75	A 37,5																																																																	
 TitaniumBase /X <table><tr><td>3102 2646</td><td>TitaniumBase /X</td></tr><tr><td>3102 2656</td><td>TitaniumBase /X висока</td></tr></table>	3102 2646	TitaniumBase /X	3102 2656	TitaniumBase /X висока		 ScanBase /X <table><tr><td>3102 2648</td><td>ScanBase /X</td></tr><tr><td>3102 2658</td><td>ScanBase /X висока</td></tr></table>	3102 2648	ScanBase /X	3102 2658	ScanBase /X висока																																																									
3102 2646	TitaniumBase /X																																																																		
3102 2656	TitaniumBase /X висока																																																																		
3102 2648	ScanBase /X																																																																		
3102 2658	ScanBase /X висока																																																																		


Робота з м'якими тканинами і встановлення абатмента

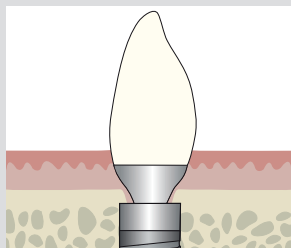

Зміщення переходу між імплантатом і абатментом до центру


Під час контурування м'яких тканин та вибору постійного абатмента необхідно враховувати деякі особливі характеристики:

- Через кінцеве з'єднання діаметр абатментів Ankylos на рівні імплантата значно менший за діаметр самого імплантата.
- М'які тканини також знаходяться під краями абатмента.

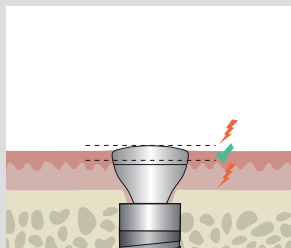


Вибір потрібної висоти ясен

- На малюнку показано правильне застосування формувача ясен.
- Якщо рівень ясен знаходиться в проміжку між двома пунктирними лініями, формувач ясен підібрано правильно.
- Якщо рівень ясен знаходиться вище верхньої пунктирної лінії, необхідно обрати формувач ясен більшої висоти; якщо нижче нижньої пунктирної лінії — меншої висоти.

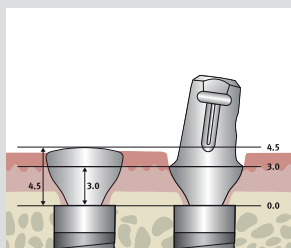

Вибір формувача ясен відповідно до абатмента


- Формувач ясен і постійний абатмент мають належати до однієї ортопедичної лінійки і мати однакову висоту ясен.
- Наведений вище опис висоти формувача ясен (GH 3,0) відноситься тільки до області від рівня з'єднання до краю коронки.
- Загальна висота формувача ясен завжди приблизно на 1,5 мм більша за номінальну висоту, якщо рахувати від рівня з'єднання (в даному випадку загальна висота складає 4,5 мм), що дозволяє також задати форму для нижньої частини профілю коронки.

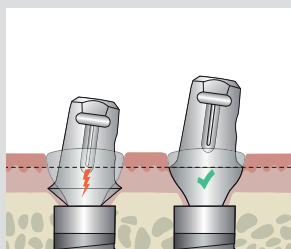


Якщо сформований отвір в м'яких тканинах менше за профіль абатмента, що використовується, це може призвести до компресії тканин ясен, якої можна уникнути. Так відбувається, коли:

1. Формувач ясен значно вище рівня ясен і абатмента, котрий потім буде використовуватися.


- Формувач ясен відповідає висоті ясен, однак висота ясен постійного абатмента нижча, ніж у використаного формувача ясен (див. малюнок).
- Діаметр постійного абатмента більший, ніж у використаного формувача ясен (наприклад, якщо вони належать до різних ортопедичних лінійок).

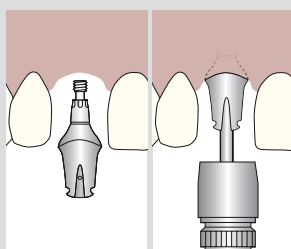

В разі використання індексованих абатментів індекс виступає в якості допоміжного елемента для їх встановлення в шести можливих положеннях.

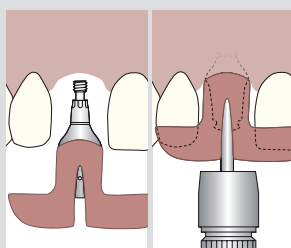

Для полегшення процесу роботи ми рекомендуємо використовувати ключ перенесення.

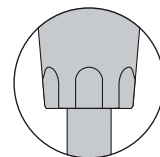

/X

Зняття відбитків /X (з індексом) З РІВНЯ ІМПЛАНТАТА

Трансфер⁶ Ankylos /X (метод відкритої ложки)
з подовжувачем гвинта²⁴

**Подовжувач гвинта
Ankylos для методу
відкритої ложки**
(10 шт.) запасна
деталь

Трансфер Ankylos /X

- Для перенесення положення імплантата на робочу модель методом відкритої ложки.

Масштаб 1,2:1



короткий



довгий



Арт.

3104 7040

3104 7042

3104 7048

Трансфер Ankylos Regular C/X⁶
(метод закритої ложки)

Трансфер Ankylos Regular C/X
(техніка закритої ложки)

- Для перенесення положення імплантата на робочу модель методом закритої ложки.

Масштаб 1,2:1



короткий



довгий

Арт.

3104 7044

3104 7046

**Аналог А-імплантата
Ankylos Regular C/X⁶**

ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення усіх трансферів:
Шестигранна викрутка 1,0 мм

Аналог імплантата Ankylos C/X:


- Для фіксації ортопедичних компонентів на робочій моделі.

Масштаб 1,2:1



Арт.

3104 7011

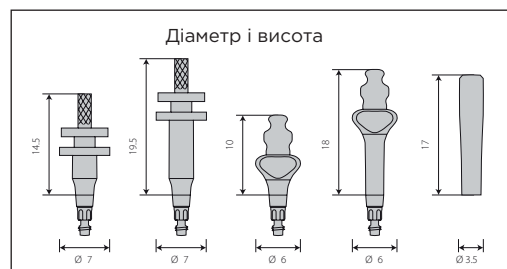

Regular /X

ШИРОКІ АБАТМЕНТИ ПІД КОРОНКИ І МОСТОВИДНІ КОНСТРУКЦІЇ

Формувач ясен Ankylos Regular C/X

- Для простого формування контуру м'яких тканин навколо імплантата.
- Вибір відповідно до ясенного краю.

Формувач ясен Ankylos Regular C/X⁴

Масштаб 1,2:1



GH 0,75



GH 1,5



GH 3,0



GH 4,5

Арт.	3102 4010	3102 4012	3102 4014	3102 4016
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Перенесення з рівня імплантата

Трансфер /X

Перенесення з рівня абатмента

Ковпачок 3 в 1 в якості ковпачка для відбитків (тільки для кута нахилу 0–22,5°)

Ковпачок 3 в 1 Ankylos Regular C/X

- Для перенесення положення ортопедичного абатмента під час виготовлення відбитків з абатментів Ankylos Regular C/X, вже встановлених в імплантати.
- Для виготовлення тимчасової реставрації з фіксацією замиканням у присутності пацієнта (тільки на необточених абатментах).
- В якості моделювального ковпачка на аналогах абатментів.

Ковпачок 3 в 1 Ankylos Regular C/X²⁰

Масштаб 1,2:1



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5

Арт.	3104 7120	3104 7121	3104 7122	3104 7123
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Аналог абатмента Ankylos Regular C/X

- Для фіксації ортопедичних компонентів після виготовлення відбитка за допомогою ковпачка 3 в 1.

Аналог абатмента Ankylos Regular C/X⁶

Масштаб 1,2:1



A 0



A 7,5





A 15



A 22,5

Арт.	3104 7110	3104 7111	3104 7112	3104 7113
------	-----------	-----------	-----------	-----------

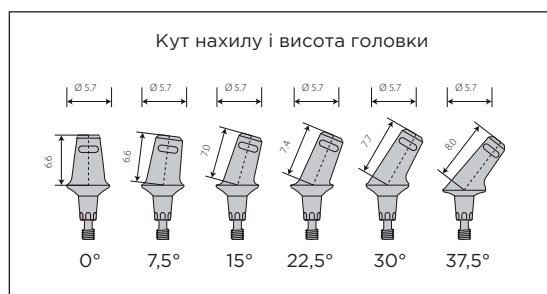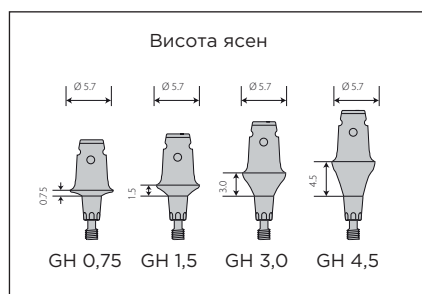

Абатмент Ankylos Regular /X⁴

Висота ясен 0,75



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5



A 30



A 37,5

Арт.	3102 4110	3102 4111	3102 4112	3102 4113	3102 4114	3102 4115
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Абатмент Ankylos Regular /X

- Легко адаптувати відповідно до клінічної ситуації завдяки наявності чотирьох варіантів висоти ясен і до шести варіантів кута нахилу.
- Можна індивідуалізувати за допомогою шліфування.
- Можливість цементної і латеральної гвинтової фіксації, а в випадку A 30 і A 37,5 — також і оклюзійної гвинтової фіксації.
- Індексований варіант або геометрія конічного з'єднання на вибір.

Висота ясен 1,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5



A 30

Арт.	3102 4120	3102 4121	3102 4122	3102 4123	3102 4124
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Висота ясен 3,0



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5

Арт.	3102 4130	3102 4131	3102 4132	3102 4133
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Латеральний
фіксаційний
шестигранний гвинт
Ankylos
M 1,4⁴



3105 6301

Горизонтальне
посадочне кільце
для фіксаційного
гвинта Ankylos
M 1,4⁴



3105 6304

Висота ясен 4,5



Масштаб 1,2:1

Нахил



A 0



A 7,5



A 15



A 22,5

Арт.	3102 4140	3102 4141	3102 4142	3102 4143
------	-----------	-----------	-----------	-----------

ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення абатментів Ankylos Regular /X:

Шестигранна викрутка 1,0 мм,
рекомендований момент сили 15 Нсм

Фіксація реставрації за допомогою латерального фіксаційного гвинта (тільки A 30 і 37,5):

Шестигранна викрутка 1,0 мм,
рекомендований момент сили 10 Нсм

Balance Anterior /X

АНАТОМІЧНІ АБАТМЕНТИ ДЛЯ ПЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛУ

Формувач ясен Ankylos Balance C/

- Для простого формування контуру м'яких тканин навколо імплантата.
- Вибір відповідно до ясенного краю.

ІНСТРУМЕНТИ

Встановлення формувачів ясен:

Шестигранна викрутка 1,0 мм

Формувач ясен Ankylos Balance C/⁴

Гвинт для формувача ясен⁴

Масштаб 1,2:1

Назва	1,5 маленький	3,0 маленький	1,5 великий	3,0 великий	1,5	3,0
Арт.	3102 1510	3102 1515	3102 1520	3102 1525	3102 1505	3102 1507

Перенесення з рівня імплантата

Трансфер /X

Абатмент Ankylos Balance Anterior /X

- Для високоестетичних одиничних коронок і мостовидних протезів у передньому відділі.
- Легко адаптувати відповідно до клінічної ситуації завдяки наявності двох варіантів діаметра, двох варіантів висоти ясен і двох варіантів кута нахилу.
- Можна індивідуалізувати за допомогою шліфування.
- Цементна або латеральна гвинтова фіксація.
- Індексований варіант або геометрія конічного з'єднання на вибір.



Абатмент Ankylos Balance Anterior /X⁴

Масштаб 1,2:1

Назва	маленький / 1,5 / прямий Ø 5,5 / В 6,0	маленький / 3,0 / прямий Ø 5,5 / В 6,0	великий / 1,5 / прямий Ø 7 / В 7,5	великий / 3,0 / прямий Ø 7 / В 7,5
Арт.	3102 2710	3102 2715	3102 2750	3102 2755

Масштаб 1,2:1

Назва	маленький / 1,5 / 15° Ø 5,5 / В 6,5	маленький / 3,0 / 15° Ø 5,5 / В 6,5	великий / 1,5 / 15° Ø 7 / В 7,5	великий / 3,0 / 15° Ø 7 / В 7,5
Арт.	3102 2730	3102 2735	3102 2770	3102 2775

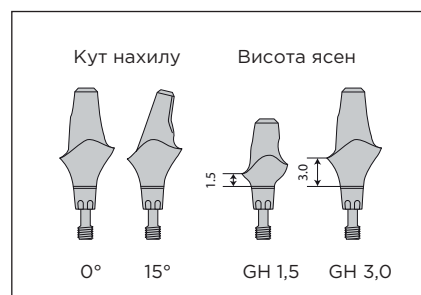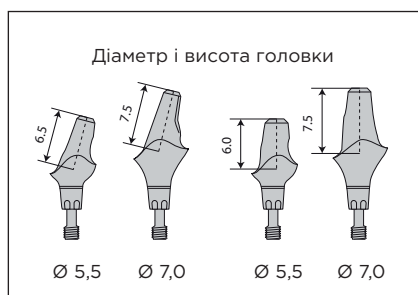

TitaniumBase /X

МЕТАЛЕВА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КЕРАМІЧНИХ АБАТМЕНТІВ

Платформа Ankylos TitaniumBase⁴



Масштаб 1,2:1

Назва

/X

/X висока

/X

/X висока

Арт.

3102 2646

3102 2656

3102 2648

3102 2658


Платформа Ankylos ScanBase^{24,4}

Платформа Ankylos TitaniumBase

- Для виготовлення керамічних абатментів з максимально індивідуалізованим дизайном.
- Титанова платформа, що має стандартне з'єднання імплантат-абатмент і адгезивну поверхню для приклеювання індивідуально виготовленого керамічного абатмента.
- Дві плоскі грані запобігають ротації.
- **Індексований варіант або геометрія конічного з'єднання на вибір.**

Платформа Ankylos ScanBase

- Для сканування геометрії абатмента.
- Дизайн той самий, що і в TitaniumBase; виготовлена з PEEK (пластик); можна використовувати спрей або порошок для сканування.
- Підходить для всіх звичайних дентальних сканерів.

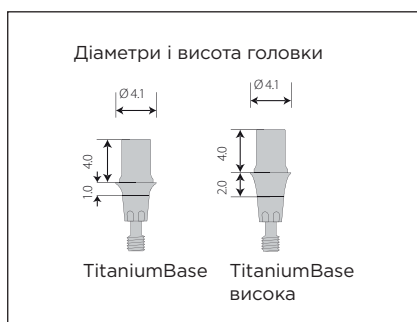

Atlantis[®] —

МАКСИМАЛЬНО ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІ ОРТОПЕДИЧНІ РІШЕННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ CAD/CAM ДЛЯ АБАТМЕНТІВ, БАЛОК І МОСТОВИДНИХ ПРОТЕЗІВ



Для забезпечення більш природного результату індивідуалізовані CAD/CAM абатменти Atlantis розробляють за унікальною технологією з використанням програмного забезпечення Atlantis VAD (Virtual Abutment Design, віртуальне проектування абатмента) і виготовляють за допомогою надсучасного процесу фрезерування. Виготовлення абатментів Atlantis можливе з титану, титану золотистого відтінку або діоксиду цирконію.

Виробництво супраструктур Atlantis здійснюється з застосуванням останніх розробок в сфері CAD/CAM технологій на основі досвіду комп'ютеризованого виробництва і виробництва медичних виробів зокрема. Виготовлення супраструктур Atlantis можливе з титану або з кобальт-хромового сплаву.

Замовлення Atlantis здійснюється онлайн через Atlantis WebOrder: www.atlantisweborder.com.

За більш детальною інформацією звертайтеся до представника компанії Dentsply Sirona Implants у вашому регіоні.



Конічні розгортки = Примірювальні імпланти Xive (довжина в мм)

Діаметр (mm)	Імпланти (довжина в мм)	Розгортки (довжина в мм)
Ø 3,5 mm	6, 6/8, 9, 5, 11, 14, 17	A6, 6, A8, A9, 5, A11, A14, A17
Ø 4,5 mm	6, 6/8, 9, 5, 11, 14, 17	B6, 6, B8, B9, 5, B11, B14, B17
Ø 5,5 mm	6, 6/8, 9, 5, 11, 14, 17	C6, 6, C8, C9, 5, C11, C14, C17
Ø 7,0 mm	8, 9, 5, 11, 14	D8, D9, 5, D11, D14

Кульковий бур	Спіралевидний бур (пілотне свердління)	Спіралевидний бур для А-імплантів	Спіралевидний бур для В-імплантів	Спіралевидний бур для С-імплантів	Спіралевидний бур для D-імплантів	Конічні розгортки	Мітчик
Кульковий				Фреза		Спіралевидний	

Масштаб 1:1

Тип сверла	Діаметр	Довжина	Артикул
Кульовий бур ⁶	Ø 1,8 мм		3103 7040
Фреза Ліндемана ⁶	Ø 2 мм, Д 8 мм		3103 7041
Спіралевидний бур ⁶	Ø 2 мм, Д 11 мм		3103 7042
Спіралевидний бур ⁶	Д 2 мм / S		3103 7043
Спіралевидний бур ⁶	Д 2 мм / M		3103 7044
Паралельна направляюча ²	Кільцевидне маркування		3103 7025
Паралельна направляюча ²			3103 7026
Подовжуючий інструмент HXSS ⁶			3103 7408

БУРИ

Спіралевидний бур Ankylos®

Масштаб 1:1

Довжина
Для імплантатів



S
A



M
A

Арт.

3103 7052

3103 7053

Спіралевидні бури Ankylos®

- Для розширення кісткового ложа до діаметра імплантата.

Ефективна глибина свердління під час препарування трохи більше вказаної довжини імплантата.



A	B	C	D
0,4 мм	0,5 мм	0,6 мм	0,8 мм

Діаметр бурів (мм)

2,9 3,8 4,7 5,7

Масштаб 1:1

Довжина
Для імплантатів



S
B



M
B

Арт.

3103 7062

3103 7063

Примітка

Всі бури підлягають очищенню і повторній стерилізації, однак кількість циклів не повинна перевищувати 10 разів (тобто, 10 пацієнтів). Пошкоджені і затуплені інструменти підлягають негайній заміні.

Масштаб 1:1

Довжина
Для імплантатів



S
C




M
C

Арт.

3103 7072

3103 7073

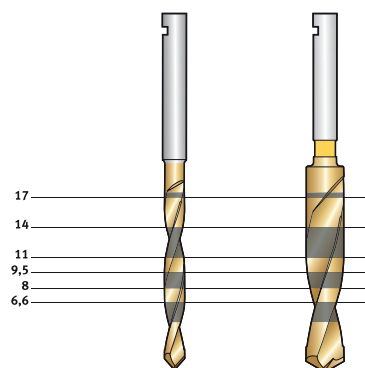

Масштаб 1:1

Довжина
Для імплантатів



S
D



M
D

Арт.

3103 7082

3103 7083

Хірургічні інструменти

КОНІЧНІ РОЗГОРТКИ / МІТЧИКИ

Конічна розгортка Ankylos

- Для розширення кісткового ложа до розміру конічного стрижня імплантата.
- Одна розгортка на імплантат.
- Використовується з кутовим наконечником (для машинних інструментів, тільки А- і В-імплантати) або ключем-тріскачкою (для ручних інструментів).
- Також використовується в якості примірного імплантата.

Конічні розгортки Ankylos⁶

Масштаб 1:1



Для імплантів

■ A6,6/A8

■ A9,5

■ A11

■ A14

■ A17

Арт. для ручних інструментів
Арт. для машинних інструментів

3103 3185
3103 7185

3103 3188
3103 7188

3103 3190
3103 7190

3103 3200
3103 7200

3103 3202
3103 7202

Масштаб 1:1



Для імплантів

■ B6,6/B8

■ B9,5

■ B11

■ B14

■ B17

Арт. для ручних інструментів
Арт. для машинних інструментів

3103 3205
3103 7205

3103 3208
3103 7208

3103 3210
3103 7210

3103 3220
3103 7220

3103 3230
3103 7230

Масштаб 1:1



Для імплантів

■ C6,6/C8

■ C9,5

■ C11

■ C14

■ C17

Арт. для ручних інструментів

3103 3233

3103 3235

3103 3238

3103 3240

3103 3250

Масштаб 1:1



Для імплантів

■ D8

■ D9,5

■ D11

■ D14


Арт. для ручних інструментів

3103 3252

3103 3254

3103 3256

3103 3258

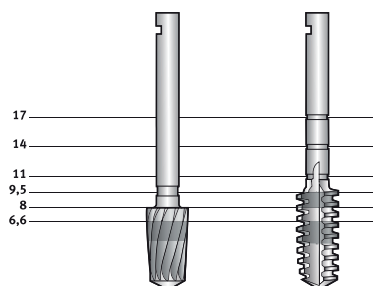

Мітчик Ankylos

- Для підготовки різьби імплантатів Ankylos.
- Один мітчик на діаметр імплантату.
- Калібрування глибини за кільцевим маркуванням або відтінком.
- Використовується з кутовим наконечником (для машинних інструментів, тільки А- і В-імплантати) або ключем-тріскачкою (для ручних інструментів).

Мітчик Ankylos⁶

Масштаб 1:1



Для імплантів

■ A

■ B

■ C

■ D

Арт. для ручних інструментів
Арт. для машинних інструментів

3103 3260
3103 7440

3103 3270
3103 7450

3103 3280

3103 3285

КЛЮЧ-ТРІСКАЧКА / НАСАДКИ ДЛЯ КЛЮЧА-ТРІСКАЧКИ

Хірургічний ключ-тріскачка з індикатором моменту сили⁶

Зменшений масштаб



Пружина ключа-тріскачки Ankylos⁶

Рожковий ключ Ankylos C/X⁶



Хірургічний ключ-тріскачка

з індикатором моменту сили

- Для безпечного встановлення імплантатів вручну.
- Гарно видимий індикатор моменту сили.
- Можна налаштувати напрямок обертання за або проти годинникової стрілки.

Арт.	3103 7500	3103 3031	3103 7502
------	-----------	-----------	-----------

Насадка для ключа-тріскачки Ankylos для машинних інструментів⁶ для конічних розгортки і мітчиків

Масштаб 1:1



коротка, HXSS

середня, HXSS

довга, HXSS

Насадка для ключа-тріскачки Ankylos для ручних інструментів⁶ для конічних розгортки і мітчиків



коротка

середня

довга

Насадки для ключа-тріскачки Ankylos

- Для використання з машинними інструментами зі стрижнем стандарту ISO 2,35 мм і системою шестигранного затискання (HXSS) у ключі-тріскачці

Насадки для ключа-тріскачки Ankylos

- Для використання з ручними інструментами у ключі-тріскачці (діаметр стрижня 2,5 мм)

Арт.	3103 7510	3103 7511	3103 7512	3103 3070	3103 3080	3103 3090
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Імплантовод ANKYLOS для імплантатів C/X⁶ для ручного встановлення

Масштаб 1:1



короткий

середній

довгий

Імплантовод Ankylos C/X з викруткою⁶ для ручного встановлення



короткий

середній

довгий

Імплантоводи Ankylos

- Для встановлення імплантатів Ankylos C/X.
- Для використання з кутовим наконечником (HXSS) або ключем тріскачкою.

Імплантовод Ankylos C/X з викруткою

- Для встановлення імплантатів і послаблення встановлювальної головки без зміни інструмента.

Арт.	3103 7531	3103 7532	3103 7533	3103 7471	3103 7472	3103 7473
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Імплантовод Ankylos для імплантатів C/X^{6, 52}

Кільце ANKYLOS з ПТФЕ⁵² (5 шт.)

Ручка Ankylos для інструментів, екстра-довга⁶

Ручка Ankylos для встановлення імплантатів C/X, екстра-довга^{6, 52}

Масштаб 1:1



короткий, HXSS для машинних інструментів

довгий, HXSS для машинних інструментів



Зменшений масштаб

Арт.		3103 7541	3103 7543	3103 7530	3103 3095	3103 7539
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Хірургічні інструменти

ФРЕЗИ ДЛЯ НАВІГАЦІЙНОЇ ХІРУРГІЇ

Мукотом Ankylos GS

- Для мінімально інвазивного розкриття імплантату.


Пілотна фреза Ankylos GS

- Для видалення залишків м'яких і твердих тканин над плечем імплантату після використання мукотома.
- Для скошування/згладжування ділянки запланованого положення імплантату (залежно від діаметра імплантату).

Мукотом Ankylos GS⁶

Пілотна фреза Ankylos GS⁶

Спіралевидний бур Ankylos GS, Ø 2 мм⁶

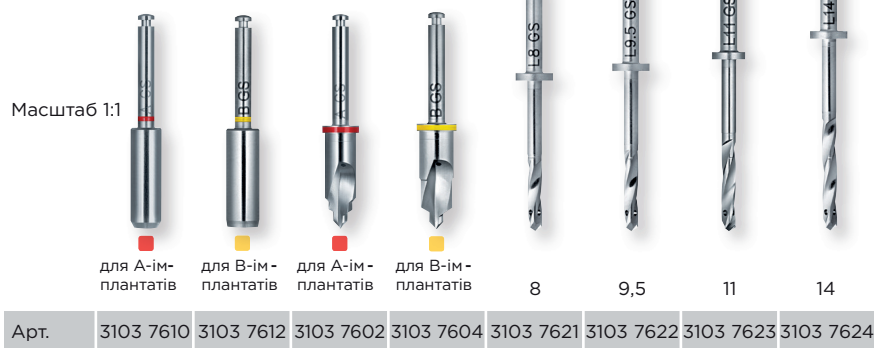

Спіралевидний бур GS і тригранна фреза GS Ankylos

- Для поетапного розширення ложа до діаметра імплантата (довжина свердла відповідає довжині імплантата).
- Система гільза-на-свердлі (свердло проходить крізь хірургічний шаблон через одягнуту на нього гільзу).

Примітка

Інструменти з маркуванням GS використовуються тільки для процедур навігаційної хірургії Dentsply Sirona Implants.

Тригранна фреза Ankylos GS⁶



Гільзи для спіралевидного бура і тригранної фрези Ankylos

- Для направлення свердла під час проходження через хірургічний шаблон (система гільза-на-свердлі).

Гільзи необхідно замінювати після використання (одна гільза — один пацієнт). Вони призначені для одноразового використання.

ІНСТРУМЕНТИ

Для встановлення гільз Ankylos на свердло або імплантовод спеціальних інструментів не потрібно.

Гільза для бура Ankylos GS⁶

Гільза для тригранної фрези Ankylos GS⁶



Конічна розгортка Ankylos GS⁶

Масштаб 1:1




Конічна розгортка Ankylos GS

- Для розширення кісткового ложа до розміру конічного стрижня імплантату.
- Одна розгортка на два варіанти довжини імплантату.

Мітчик Ankylos GS⁶

Масштаб 1:1

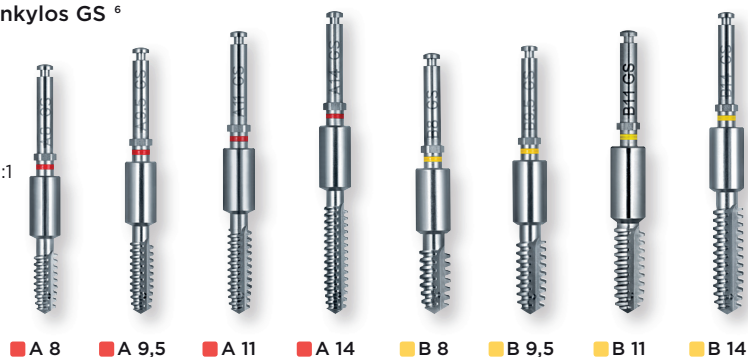

Мітчик Ankylos GS

- Для нарізання різьби імплантата Ankylos C/X.
- Один мітчик на діаметр і довжину імплантата.

Примітка

Ріжучі інструменти розраховані приблизно на 20 циклів використання. Пошкоджені або затуплені інструменти підлягають негайній заміні.

Імплантоводи Ankylos для навігаційної хірургії (GS)⁶


Масштаб 1:1



Гільза Ankylos для імплантовода GS⁶ (запасна деталь)



Абатмент для стабілізації Ankylos GS^{6, 52}

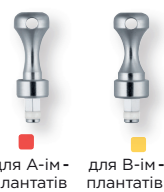

Імплантовод Ankylos GS


- Два варіанти довжини; вузький діаметр для А-імплантів, широкий діаметр для В-імплантів.

Абатмент для стабілізації Ankylos GS

- Для запобігання латеральному зміщенню і обертанню шаблона Siplant Safe Guide під час препарування ложа під кілька імплантів.

Позиціонер Ankylos^{2, 4}

Масштаб 1:1

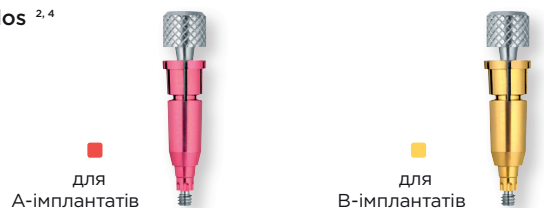

Позиціонер Ankylos

- Для виготовлення ортопедичних реставрацій до операції.
- Встановлення реставрації одразу після імплантації.

Хірургічні набори

Індивідуальні хірургічні набори, укомплектовані відповідно до ваших потреб

- Прості, мобільні, економічні, з модульним дизайном та абсолютною мінімальною кількістю необхідних інструментів.
- За бажанням, можливе додавання необхідних модулів.
- Інструменти надійно зафіксовані в силіконових вставках.
- Проста і зрозуміла послідовність використання інструментів впродовж операції.
- Можливість легкого та ретельного очищення.

Хірургічний набір Ankylos

■ ■ машинні АВ

Зменшений масштаб



Всі інструменти, необхідні для встановлення імплантатів Ankylos C/X A і B

Арт.

3103 6523

Хірургічний набір Ankylos

■ ■ ручні АВ



Всі інструменти, необхідні для встановлення імплантатів Ankylos C/X A і B

3103 6513

Хірургічний набір Ankylos

■ ■ ■ ручні АВС

Зменшений масштаб



Всі інструменти, необхідні для встановлення імплантатів Ankylos C/X A, B і C

Арт.

3103 6503

Хірургічний набір Ankylos ExpertEase (навігаційна хірургія)

■ ■ машинні АВ



Додаткові інструменти, необхідні для встановлення імплантатів Ankylos C/X A і B довжиною L 8 – L 14 за шаблонами

3103 6530

Лоток для миття Ankylos Washtray

Лоток для миття Ankylos Washtray

Зменшений масштаб



Арт.

3103 6600

Контейнер для стерилізації для лотка Ankylos Washtray



3103 6602

Модуль для фрез Ankylos

(пустий)

■ машинні А

■ машинні В

Арт.	3103 6573	3103 6574
------	-----------	-----------

■ ручні А

■ ручні В

■ ручні С

■ ручні D

Арт.	3103 6561	3103 6562	3103 6563	3103 6564
------	-----------	-----------	-----------	-----------

GS 2,0
(навігаційна хірургія)

■ GS A
(навігаційна хірургія)

■ GS B
(навігаційна хірургія)

Арт.	3103 6583	3103 6584	3103 6585
------	-----------	-----------	-----------

Модуль для інструментів Ankylos (пустий)

Арт.	3103 6560
------	-----------

Модуль для інструментів Ankylos GS (пустий, навігаційна хірургія)

Арт.	3103 6582
------	-----------

Кришка набору Ankylos

Арт.	3103 6551
------	-----------



Лоток під хірургічний набір Ankylos (пустий)

■ ■ машинні АВ

■ ■ ■ ручні ABC

■ ■ ExpertEase

Арт.	3103 6542	3103 6540	3103 6531
------	-----------	-----------	-----------

Лоток Washtray, запасні деталі

Накладка лотка для миття Ankylos Washtray

Арт.	3103 6601
------	-----------

Багаторазовий фільтр контейнера для стерилізації лотка Washtray (2 шт.)

Арт.	3107 1003
------	-----------

Тримач інструментів зі стрижнем за стандартом ISO (5 шт.)

Арт.	3107 1004
------	-----------

Тримач насадок для ключа-тріскачки (5 шт.)

Арт.	3107 1006
------	-----------


Додаткові хірургічні інструменти

СИНУС-ЛІФТИНГ

Інструменти для синус-ліфтингу Ankylos

- Набір інструментів для відкритого синус-ліфтингу.
- Для використання необхідно пройти відповідне навчання.

Хірургічний набір інструментів для синус-ліфтингу Ankylos повний

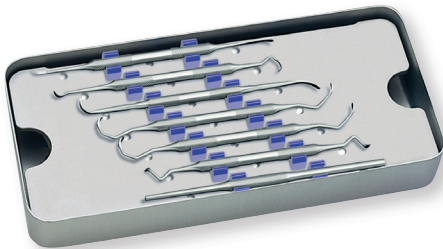

Арт.	3103 6350
------	-----------

Елеватори для синус-ліфтингу Ankylos⁶

Елеватор 01

Елеватор 02

Елеватор 03

Елеватор для мембрани маленький

Зменшений масштаб



Арт.	3103 4510	3103 4520	3103 4530	3103 4540
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Елеватор для мембрани великий

Елеватор для мембрани маленький, з подвійним вигином

Стоматологічне долото

Хірургічний молоток для синус-ліфтингу


Зменшений масштаб



Арт.	3103 4550	3103 4560	3103 4570	3103 4580
------	-----------	-----------	-----------	-----------

ОСТЕОТОМІЯ

Експандер кістки Ankylos⁶

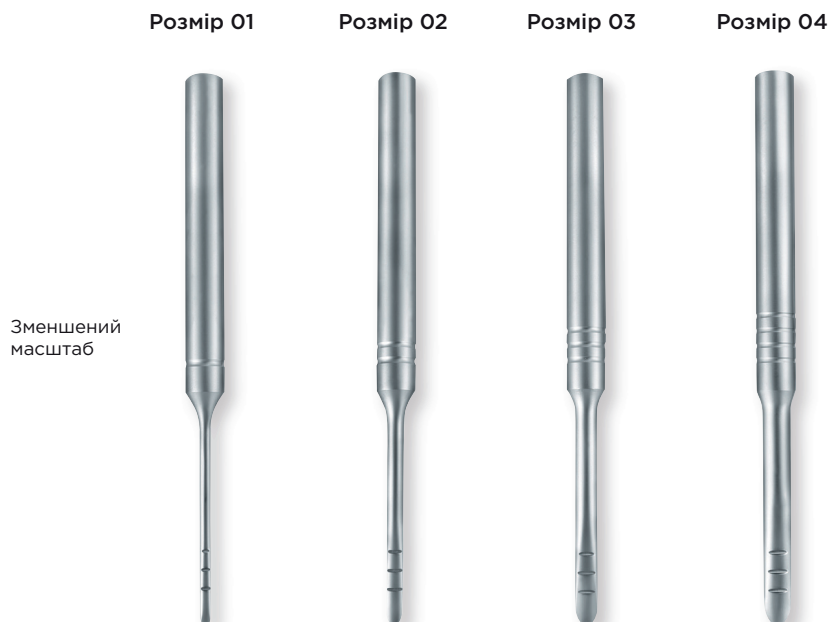

Експандер кістки Ankylos

- Для подовження альвеолярного гребеня за рахунок розділення лабіальної і піднебінної пластинок кістки.
- D-подібний профіль робочих кінчиків інструменту.

Хірургічний набір експандерів кістки Ankylos повний



Арт.	3103 4310	3103 4320	3103 4330	3103 4340
------	-----------	-----------	-----------	-----------


Арт.	3103 6300
------	-----------

Конденсор кістки Ankylos⁶



Конденсор кістки Ankylos

- Для підготовки ложа імплантату в кістці дуже низької щільності.
- Також використовується для закритого синус-ліфтингу.
- Заокруглений профіль робочих кінчиків інструмента.

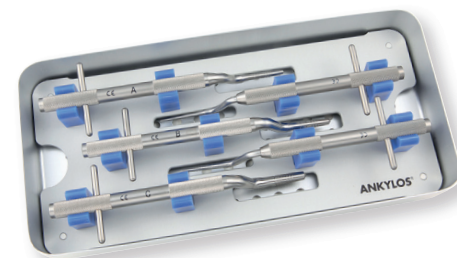

Хірургічний набір конденсорів кістки Ankylos, повний

Арт.	3103 6320
------	-----------

Арт. для прямих	3103 4350	3103 4360	3103 4370	3103 4380	3103 4390
Арт. для штикових	3103 4352	3103 4362	3103 4372	3103 4382	3103 4392

Хірургічний набір конденсорів кістки Ankylos, штикових, повний

Арт.	3103 6325
------	-----------

Фізіодиспенсер

Фізіодиспенсер Frios S/i

- Просте управління, розроблене спеціально для імплантологічних операцій.
- Потужний і тихий хірургічний мотор.
- Зрозуміла, логічна послідовність програм; функція нарізання різьби, що активується натисканням кнопки.

Фізіодиспенсер Frios S/i

Комплектація: фізіодиспенсер Frios S/i з хірургічним мотором (довжина кабелю 1,8 м), підставка для мотора, штанга, ножна педаль, кабель живлення, блокіратор для мотора, набір фіксаторів трубок (5 шт.), шланг системи охолодження.



Зменшений масштаб

	220-240 В змін. струму	100-130 В змін. струму
Арт.	90 - 6600	90 - 6605

Кутові наконечники Frios

- Запатентована система шестигранного затискання для безпечної роботи і меншого зношення інструментів.
- Доступна розбірна версія з головкою, що обертається на 90° для роботи в ділянках з обмеженим доступом, та можливостями чищення, що задовольняють найсуворіші гігієнічні вимоги.
- Також версія з LED-підсвічуванням — нейтральне біле світло високої інтенсивності і більшим охопленням робочого поля (у порівнянні зі звичайними галогеновими лампами).

Кутовий наконечник Frios



Зменшений масштаб

	WS-75 20:1 розбірний	WI-75 20:1	WI-75 LED G
Арт.	90 - 6720	90 - 6710	90 - 6810

Примітка для користувачів фізіодиспенсера Frios S

Під час використання даних кутових наконечників з фізіодиспенсером Frios S можливі проблеми з сумісністю. Перед замовленням або першим використанням проконсультуйтеся з вашим дистриб'ютором.

Наконечник Frios



Зменшений масштаб

	прямий 1:1	кутовий 1:1	прямий SI-11 LED G
Арт.	90 - 5030	90 - 5050	90 - 6850

Фізіодиспенсер

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Хірургічний мотор фізіодиспенсера Frios S/i (довжина кабелю 1,8 м)

Ножна педаль Frios S/i

Підходить для фізіодиспенсера Frios S/i

Підходить для фізіодиспенсера Frios S/i

Арт.	90 - 6620	90 - 6630
------	-----------	-----------

Внутрішня ірригаційна трубка для кутового наконечника Frios 20:1

Внутрішня ірригаційна трубка, довга (для подовжувача фрези)

Підходить для фізіодиспенсерів Frios S/i та Frios S

Підходить для фізіодиспенсерів Frios S/i та Frios S

Арт.	90 - 5042	90 - 5043
------	-----------	-----------

Стерильна захисна плівка для фізіодиспенсерів Frios S, Frios E для хірургічного мотора (10 шт.)

Набір фіксаторів трубок для фізіодиспенсера Frios S (5 шт.)

Підходить для всіх фізіодиспенсерів Frios

Підходить для всіх фізіодиспенсерів Frios

Арт.	90 - 6442	90 - 6443
------	-----------	-----------

Хірургічний мотор фізіодиспенсера Frios S (довжина кабелю 1,8 м)

Ножна педаль фізіодиспенсера Frios S

Підходить для фізіодиспенсера Frios S

Підходить для фізіодиспенсера Frios S

Арт.	90 - 6410	90 - 6420
------	-----------	-----------

ШЛАНГИ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ

Шланг системи охолодження фізіодиспенсера Frios S/i (кабель мотора 2,2 м, 5 шт.)

Шланг системи охолодження для Frios ISU, універсальний (5 шт.), також підходить для ASU

Шланг системи охолодження фізіодиспенсера Frios S (кабель мотора 1,8 м, 5 шт.)

Зменшений масштаб



Арт.	90 - 6446	90 - 5005	90 - 6440
------	-----------	-----------	-----------

Шланг системи охолодження фізіодиспенсера Frios S (кабель мотора 3,5 м / 3 шт.)

Шланг системи охолодження фізіодиспенсера Frios E (кабель мотора 1,8 м/5 шт.) з гвинтовим з'єднанням типу Люер для триходового крана

Зменшений масштаб



Арт.	90 - 6441	90 - 6542
------	-----------	-----------

Додаткові хірургічні інструменти

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Інструмент Ankylos для видалення гвинта-заглушки

- Насадка на ручку для викрутки.
- Самонарізний, обертання проти годинникової стрілки для безпечного видалення гвинта-заглушки з імплантату.

Інструмент Ankylos для видалення гвинта-заглушки⁶

Масштаб 1:1



короткий



довгий

Арт.	3103 3434	3103 3435	3103 3410	3103 3415
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ручка Ankylos для викрутки⁶



Стандартна
Ø 7 мм



Стандартна
Ø 12 мм

Пробійник слизової АТР

- Для трепанації м'яких тканин шляхом обертання гільзи пробійника і одночасного маркування альвеолярного гребеня.

Пробійник слизової АТР⁶

Масштаб 1:1



Гільза для пробійника слизової АТР⁶

Арт.	3103 4090	3103 4091
------	-----------	-----------

Примірочні абатменти

Лабораторний набір
примірочних абатментів
Ankylos Balance Posterior
(60 примірочних абатментів)

Лабораторний набір
примірочних абатментів
Ankylos Standard
(64 примірочних абатменти)



Зменшений
масштаб

Арт.	3104 5710	3104 5500
------	-----------	-----------

Примірочний абатмент Ankylos⁵³
одиничні абатменти в наборах по 4 шт.

	Примірочний абатмент а / 1,5 / 4,0 червоний	Примірочний абатмент а / 1,5 / 6,0 жовтий	Примірочний абатмент а / 3,0 / 4,0 червоний	Примірочний абатмент а / 3,0 / 6,0 жовтий
Арт. для прямих	3104 5550	3104 5560	3104 5570	3104 5580
Арт. для 15°	3104 5630	3104 5640	3104 5650	3104 5660


	Примірочний абатмент b / 1,5 / 4,0 синій	Примірочний абатмент b / 1,5 / 6,0 зелений	Примірочний абатмент b / 3,0 / 4,0 синій	Примірочний абатмент b / 3,0 / 6,0 зелений
Арт. для прямих	3104 5590	3104 5600	3104 5610	3104 5620
Арт. для 15°	3104 5670	3104 5680	3104 5690	3104 5700

Ортопедичні інструменти

Ортопедичний міні-набір Ankylos

Ортопедичний набір Ankylos

Зменшений масштаб

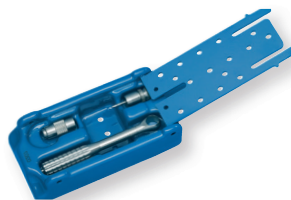

Арт.	3103 6165	3103 6120
------	-----------	-----------

Ортопедичний набір Ankylos для системи абатментів Balance

Ортопедичний набір Ankylos для системи абатментів Standard

Арт.	3103 6140	3103 6150
------	-----------	-----------

Вміст ортопедичного набору:	3103 6165 (mini)	3103 6120	3103 6140 (Balance)	3103 6150 (Standard)
Ручка для викрутки, стандартна Ø 7 мм		■	■	■
Інструмент для видалення гвинтів-заглушок, короткий		■	■	■
Інструмент для видалення гвинтів-заглушок, довгий		■	■	■
Насадка-викрутка 1,6 мм пласка		■		■
Викрутка 1,0 мм шестигранна		■	■	■
Викрутка 1,0 мм пласка		■		■
Ключ для позиціонування кутових абатментів		■		■
Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки, 1,0 мм шестигранна, 15 Нсм	■	■	■	■
Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки, 1,8 мм шестигранна, 25 Нсм		■	■	
Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки, 1,0 мм шестигранна, короткая, 10 Нсм		■	■	■
Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки для а-абатментів, пряма (Standard), 25 Нсм		■		■
Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки для b-абатментів, пряма (Standard), 25 Нсм		■		■
Ортопедичний ключ-тріскачка	■	■	■	■
Інструмент для монтажу	■	■	■	■

Ортопедичні інструменти

Шестигранна викрутка Ankylos,⁶ 1 мм

Масштаб 1:1



Арт.	3103 3400	3103 3410	3103 3415
------	-----------	-----------	-----------

Ручка Ankylos для викрутки⁶



Стандартна
Ø 7 мм



Стандартна
Ø 12 мм

Інструмент Ankylos для видалення гвинта-заглушки

- Можна вставляти в ручку для викрутки.
- Самонарізний інструмент, що вкручується, для безпечного видалення гвинта-заглушки з імплантату.

Інструмент Ankylos для видалення гвинта-заглушки⁶

Масштаб 1:1



коротка



довга

Насадка-викрутка Ankylos 1,6 мм плоска⁶



для шліцевих гвинтів

Арт.	3103 3434	3103 3435	3103 3450
------	-----------	-----------	-----------

Насадка-викрутка Ankylos 1,0 мм шестигранна⁶

Масштаб 1:1



для шестигранних
гвинтів

Насадка-викрутка Ankylos 1,0 мм шестигранна, коротка⁶



коротка

Насадка-викрутка Ankylos 1,0 мм плоска⁶



для гвинтів без головок
з цементною фіксацією
супраструктур

Арт.	3103 3455	3103 3456	3103 3460
------	-----------	-----------	-----------

Активатор кулькового замка Ankylos^{6, 20}



Зменшений
масштаб

Деактиватор кулькового замка Ankylos^{6, 20}



Ключ Ankylos для встановлення абатментів Standard⁶



для абатментів
a-Standard,
короткий



для абатментів
b-Standard,
короткий



Ключ для
позиціону-
вання
абат-
ментів⁶

Арт.	3103 3501	3103 3502	3103 3471	3103 3481	3103 3485
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Інструмент Ankylos для монтажу насадок в ортопедичному ключі-тріскачці⁶

Ортопедичний ключ-тріскачка Ankylos⁶

Масштаб 1:1



Арт.	3103 3632	3103 3630
------	-----------	-----------

Насадка Ankylos для ортопедичного ключа-тріскачки⁶

Масштаб 1:1



1,0 мм шестигранна 1,0 мм шестигранна довга 1,0 мм шестигранна коротка 1,8 мм шестигранна для Locator для шаровидного замка для а-абатментів для б-абатментів для а-абатментів довга для б-абатментів довга

Арт.	3103 3625	3103 3628	3103 3626	3103 3627	3103 3635	3103 3623	3103 3621	3103 3622	3103 3633	3103 3634
Момент сили, Нсм	15	15	10	25	30	25	25	25	25	25

Лабораторна викрутка Ankylos^{6/20}
момент сили 10 Нсм

Зменшений масштаб



Фінішер Ankylos⁶



для вузьких абатментів Balance Base

для конусного оклюзійного ретенційного гвинта

для конусного латерального ретенційного гвинта

Ручка Ankylos для аналогів абатментів і абатментів^{6/54}



Арт.	3103 3640	3103 3571	3103 3580	3103 3590	3103 3602
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Моделі і матеріали

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ МОДЕЛІ

Демонстраційні моделі

Арт.	Назва
3109 9201	Акрилова модель верхньої щелепи під коронку і мостовидну конструкцію Ankylos C/X (3 імплантати без ортопедичних конструкцій)
3109 9240	Акрилова модель беззубої нижньої щелепи Ankylos (4 імплантати без ортопедичних конструкцій)
3109 9262	Модель для демонстрації зміни кута нахилу абатментів Ankylos SynCone (без ортопедичних конструкцій)
3109 9261	Акрилова модель Ankylos SynCone з ортопедичними конструкціями
3109 9265	Акрилова модель Ankylos SmartFix без ортопедичних конструкцій

Моделі і матеріали

СПЕЦИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ

Метали

Тип	Індекс	Склад
Титан	2	Титан 2 класу, DIN EN ISO 5832-2
Титан	3	Титан 4 класу, DIN EN ISO 5832-2
Титан	4	Сплав Ti6Al4V
Титан	40	Сплав Ti6Al4V 5 класу
Алюміній	5	Сплав AlMg ₃
Нержавіюча сталь	6	Хірургічна сталь
Нержавіюча сталь	49	316L SS SS/303 SE
Нержавіюча сталь	51	316L SS
Permador® PDF*	11	Au: 60 %, Pt: 39 %, Ir: 1 %
Degunorm®**	12	Au: 73,8 %, Pt: 9,0 %, Ag: 9,2 %, Cu: 4,4 %, Zn: 2,0 %, Ir: 0,1 %, In: 1,5 %
Degulor® 3406	13	Au: 65,0 %, Ag: 13,0 %, Cu: 11,5 %, Pt: 8,9 %, Pd: 1,0 %, Zn: 0,5 %, Ir: 0,1 %
Permador®	14	Au: 60,0 %, Pt: 24,9 %, Pd: 15 %, Ir: 0,1 %
Поліетилен/алюміній	42	LDPE/6061 T6 Al
Поліамід/поліетилен/нерж. сталь/пластмаса	43	Нейлон/LDPE/Ti6Al4V/силіконовий каучук
Поліамід/поліетилен/нерж. сталь/пластмаса	44	Нейлон/LDPE/303 SE SS/силіконовий каучук
Алюміній	45	Алюміній 6061 T6
Латунь/поліоксиметилен	48	MS-002, DELRIN, 1/4"
Латунь/полісульфон	50	MS-013-1 ПОЛІСУЛЬФОН (3/8")

* TEC 12.1; ** TEC 16.7.

Пластмаси

Тип	Індекс	Склад
Поліоксиметилен	20	
Поліетеретеркетон (ПЕЕК)	24	
Силікон	26	
Силікон	47	Силіконовий каучук
Полікарбонат	27	
Поліамід	41	Нейлон Zytel 101L
Поліетилен/алюміній	42	LDPE/6061 T6 Al
Поліамід/поліетилен/нерж. сталь/пластмаса	43	Нейлон/LDPE/Ti6Al4V/силіконовий каучук
Поліамід/поліетилен/нерж. сталь/пластмаса	44	Нейлон/LDPE/303 SE SS/силіконовий каучук
Поліетилен	46	LDPE
Латунь/поліоксиметилен	48	MS-002, DELRIN, 1/4"
Латунь/полісульфон	50	MS-013-1 ПОЛІСУЛЬФОН (3/8")
Політетрафторетилен	52	
Полісульфон	53	
Полівінілхлорид	54	

Кераміка

Тип	Індекс	Склад
Діоксид цирконію	32	ZrO ₂

Показчик продукції

Арт.	Назва	Стор.
3101 0110	Мембранний гвинт C/X Ø 3,5 мм	04
3101 0120	Мембранний гвинт C/X Ø 6,0 мм	04
3101 0130	Мембранний гвинт C/X Ø 6,0 мм, для синус-ліфтингу 1 мм	04
3101 0140	Мембранний гвинт C/X Ø 6,0 мм, для синус-ліфтингу 2 мм	04
3101 0403	Імплантат C/X A 6,6 Ø 3,5 / L 6,6	05
3101 0405	Імплантат C/X A 8 Ø 3,5 / L 8	05
3101 0408	Імплантат C/X A 9,5 Ø 3,5 / L 9,5	05
3101 0410	Імплантат C/X A 11 Ø 3,5 / L 11	05
3101 0420	Імплантат C/X A 14 Ø 3,5 / L 14	05
3101 0422	Імплантат C/X A 17 Ø 3,5 / L 17	05
3101 0423	Імплантат C/X B 6,6 Ø 4,5 / L 6,6	05
3101 0425	Імплантат C/X B 8 Ø 4,5 / L 8	05
3101 0428	Імплантат C/X B 9,5 Ø 4,5 / L 9,5	05
3101 0430	Імплантат C/X B 11 Ø 4,5 / L 11	05
3101 0440	Імплантат C/X B 14 Ø 4,5 / L 14	05
3101 0450	Імплантат C/X B 17 Ø 4,5 / L 17	05
3101 0452	Імплантат C/X C 6,6 Ø 5,5 / L 6,6	05
3101 0453	Імплантат C/X C 8 Ø 5,5 / L 8	05
3101 0455	Імплантат C/X C 9,5 Ø 5,5 / L 9,5	05
3101 0458	Імплантат C/X C 11 Ø 5,5 / L 11	05
3101 0460	Імплантат C/X C 14 Ø 5,5 / L 14	05
3101 0470	Імплантат C/X C 17 Ø 5,5 / L 17	05
3101 0472	Імплантат C/X D 8 Ø 7,0 / L 8	05
3101 0474	Імплантат C/X D 9,5 Ø 7,0 / L 9,5	05
3101 0476	Імплантат C/X D 11 Ø 7,0 / L 11	05
3101 0478	Імплантат C/X D 14 Ø 7,0 / L 14	05
3101 0480	Гвинт-заглушка C/X	04
3101 0481	Гвинт-заглушка C/X, 1 мм	04
3101 0482	Гвинт-заглушка C/X, 2 мм	04
3102 1011	Формувач ясен Standard C/ компактний a / 1,5	30
3102 1021	Формувач ясен Standard C/ компактний a / 3,0	30
3102 1026	Формувач ясен Standard C/ компактний a / 4,5	30
3102 1028	Формувач ясен Standard C/ компактний a / 6,0	30
3102 1031	Формувач ясен Standard C/ компактний b / 1,5	30
3102 1041	Формувач ясен Standard C/ компактний b / 3,0	30

Арт.	Назва	Стор.
3102 1050	Абатмент Standard C/ a / 1,5 / 4,0 прямий	31
3102 1060	Абатмент Standard C/ a / 1,5 / 6,0 прямий	31
3102 1070	Абатмент Standard C/ a / 3,0 / 4,0 прямий	31
3102 1076	Абатмент Standard C/ a / 4,5 / 4,0 прямий	31
3102 1078	Абатмент Standard C/ a / 6,0 / 4,0 прямий	31
3102 1080	Абатмент Standard C/ a / 3,0 / 6,0 прямий	31
3102 1090	Абатмент Standard C/ b / 1,5 / 4,0 прямий	31
3102 1100	Абатмент Standard C/ b / 1,5 / 6,0 прямий	31
3102 1110	Абатмент Standard C/ b / 3,0 / 4,0 прямий	31
3102 1120	Абатмент Standard C/ b / 3,0 / 6,0 прямий	31
3102 1130	Абатмент Standard C/ a / 1,5 / 4,0 15°	31
3102 1140	Абатмент Standard C/ a / 1,5 / 6,0 15°	31
3102 1150	Абатмент Standard C/ a / 3,0 / 4,0 15°	31
3102 1160	Абатмент Standard C/ a / 3,0 / 6,0 15°	31
3102 1170	Абатмент Standard C/ b / 1,5 / 4,0 15°	31
3102 1180	Абатмент Standard C/ b / 1,5 / 6,0 15°	31
3102 1190	Абатмент Standard C/ b / 3,0 / 4,0 15°	31
3102 1200	Абатмент Standard C/ b / 3,0 / 6,0 15°	31
3102 1300	Абатмент з кульковим замком C/ a / 1,5 в комплекті	28
3102 1301	Абатмент з кульковим замком C/ a / 1,5	28
3102 1310	Абатмент з кульковим замком C/ a / 3,0 в комплекті	28
3102 1311	Абатмент з кульковим замком C/ a / 3,0	28
3102 1312	Матриця для кулькового замка	28
3102 1313	Силіконове кільце для кулькового замка	28
3102 1320	Абатмент з кульковим замком C/ a / 4,5 в комплекті	28
3102 1321	Абатмент з кульковим замком C/ a / 4,5	28
3102 1405	Гільза для полімеризації для SynCone	27
3102 1431	Шестигранний центральний гвинт для абатмента Permador	28

Арт.	Назва	Стор.
3102 1445	Balance Posterior C/ 0,0 прямий	28
3102 1451	Формувач ясен 0,0 А	28
3102 1452	Формувач ясен 0,0 В	28
3102 1454	Формувач ясен 0,0 С	28
3102 1505	Гвинт для формувача ясен Balance Anterior 1,5	20 40
3102 1507	Гвинт для формувача ясен Balance Anterior 3,0	20 40
3102 1510	Формувач ясен Balance Anterior C/ 1,5 маленький, з гвинтом	20 40
3102 1515	Формувач ясен Balance Anterior C/ 3,0 маленький, з гвинтом	20 40
3102 1520	Формувач ясен Balance Anterior C/ 1,5 великий, з гвинтом	20 40
3102 1525	Формувач ясен Balance Anterior C/ 3,0 великий, з гвинтом	20 40
3102 1528	Формувач ясен Balance Posterior C/ 0,75	18
3102 1530	Формувач ясен Balance Posterior C/ 1,5	18
3102 1535	Формувач ясен Balance Posterior C/ 3,0	18
3102 1540	Формувач ясен Balance Posterior C/ 4,5	18
3102 1550	Balance Anterior C/ маленький / 1,5 прямий	21
3102 1560	Balance Anterior C/ маленький / 3,0 прямий	21
3102 1570	Balance Anterior C/ большой / 1,5 прямий	21
3102 1580	Balance Anterior C/ большой / 3,0 прямий	21
3102 1590	Balance Anterior C/ маленький / 1,5 15°	21
3102 1600	Balance Anterior C/ маленький / 3,0 15°	21
3102 1610	Balance Anterior C/ великий / 1,5 15°	21
3102 1620	Balance Anterior C/ великий / 3,0 15°	21
3102 1625	Balance Posterior C/ 0,75 прямий	19
3102 1630	Balance Posterior C/ 1,5 прямий	19
3102 1640	Balance Posterior C/ 3,0 прямий	19
3102 1645	Balance Posterior C/ 4,5 прямий	19
3102 1647	Balance Posterior C/ 0,75 7,5°	19
3102 1648	Balance Posterior C/ 0,75 15°	19
3102 1649	Balance Posterior C/ 1,5 7,5°	19
3102 1650	Balance Posterior C/ 1,5 15°	19
3102 1652	Balance Posterior C/ 0,75 22,5°	19
3102 1653	Balance Posterior C/ 1,5 22,5°	19
3102 1654	Balance Posterior C/ 0,75 30°	19
3102 1655	Balance Posterior C/ 1,5 30°	19

Арт.	Назва	Стор.
3102 1659	Balance Posterior C/ 0,75 37,5°	19
3102 1660	Balance Posterior C/ 3,0 15°	19
3102 1665	Balance Posterior C/ 4,5 15°	19
3102 2110	Абатмент SynCone C/ 1,5 прямий 5°	27
3102 2112	Абатмент SynCone C/ 1,5 / 7,5° 5°	27
3102 2114	Абатмент SynCone C/ 1,5 / 15° 5°	27
3102 2116	Абатмент SynCone C/ 1,5 / 22,5° 5°	27
3102 2118	Абатмент SynCone C/ 1,5 / 30° 5°	27
3102 2120	Абатмент SynCone C/ 3,0 прямий 5°	27
3102 2122	Абатмент SynCone C/ 3,0 / 7,5° 5°	27
3102 2124	Абатмент SynCone C/ 3,0 / 15° 5°	27
3102 2126	Абатмент SynCone C/ 3,0 / 22,5° 5°	27
3102 2128	Абатмент SynCone C/ 3,0 / 30° 5°	27
3102 2130	Абатмент SynCone C/ 4,5 прямий 5°	27
3102 2132	Абатмент SynCone C/ 4,5 / 7,5° 5°	27
3102 2134	Абатмент SynCone C/ 4,5 / 15° 5°	27
3102 2136	Абатмент SynCone C/ 4,5 / 22,5° 5°	27
3102 2138	Абатмент SynCone C/ 4,5 / 30° 5°	27
3102 2198	Конусний ковпачок Degulor з ретенційними елементами для SynCone 5°	27
3102 2199	Конусний ковпачок Degulor без ретенційних елементів для SynCone 5°	27
3102 2510	Формувач ясен C/ Ø 4,2 GH 0,75	24 26
3102 2512	Формувач ясен C/ Ø 4,2 GH 1,5	24 26
3102 2514	Формувач ясен C/ Ø 4,2 GH 3,0	24 26
3102 2516	Формувач ясен C/ Ø 4,2 GH 4,5	24 26
3102 2520	Абатмент Balance Base C/ вузький GH 0,75	25
3102 2530	Абатмент Balance Base C/ вузький GH 1,5	25
3102 2540	Абатмент Balance Base C/ вузький GH 3,0	25
3102 2542	Абатмент Balance Base C/ GH 3 / А 15	25
3102 2546	Абатмент Balance Base C/ GH 3 / А 30	25
3102 2550	Абатмент Balance Base C/ вузький GH 4,5	25
3102 2552	Абатмент Balance Base C/ GH 4,5 / А 15	25
3102 2556	Абатмент Balance Base C/ GH 4,5 / А 30	25
3102 2570	Головка абатмента Balance Base	24
3102 2590	Захисний ковпачок для вузького абатмента Balance Base	24
3102 2610	Locator C/ GH 2,0	29
3102 2612	Locator C/ GH 3,0	29

Показчик продукції

Арт.	Назва	Стор.
3102 2614	Locator C/ GH 4,0	29
3102 2616	Locator C/ GH 5,0	29
3102 2618	Locator C/ GH 6,0	29
3102 2642	Платформа TitaniumBase C/	22
3102 2644	Платформа ScanBase C/	22
3102 2646	Платформа TitaniumBase /X	41
3102 2648	Платформа ScanBase /X	41
3102 2652	Платформа TitaniumBase C/ висока	22
3102 2654	Платформа ScanBase C/ висока	22
3102 2656	Платформа TitaniumBase /X висока	41
3102 2658	Платформа ScanBase /X висока	41
3102 2710	Balance Anterior /X маленький / 1,5 / 0°	40
3102 2715	Balance Anterior /X маленький / 3,0 / 0°	40
3102 2730	Balance Anterior /X маленький / 1,5 / 15°	40
3102 2735	Balance Anterior /X маленький / 3,0 / 15°	40
3102 2750	Balance Anterior / X великий / 1,5 / 0°	40
3102 2755	Balance Anterior / X великий / 3,0 / 0°	40
3102 2770	Balance Anterior / X великий / 1,5 / 15°	40
3102 2775	Balance Anterior / X великий / 3,0 / 15°	40
3102 3010	Cercon Balance C/ маленький 1,5 прямой, нейтральный	21
3102 3015	Cercon Balance C/ маленький 3,0 прямой, нейтральный	21
3102 3030	Cercon Balance C/ маленький 1,5 15°, нейтральный	21
3102 3035	Cercon Balance C/ маленький 3,0 15°, нейтральный	21
3102 3050	Cercon Balance C/ великий 1,5 прямой, нейтральный	21
3102 3055	Cercon Balance C/ великий 3,0 прямой, нейтральный	21
3102 3070	Cercon Balance C/ великий 1,5 15°, нейтральный	21
3102 3075	Cercon Balance C/ великий 3,0 15°, нейтральный	21
3102 3310	Cercon Balance C/ маленький 1,5 прямой, дентин	21
3102 3311	Тимчасовий абатмент Balance маленький 1,5 0° дентин	20
3102 3315	Cercon Balance C/ маленький 3,0 прямой, дентин	21
3102 3316	Тимчасовий абатмент Balance маленький 3,0 0° дентин	20
3102 3330	Cercon Balance C/ маленький 1,5 15°, дентин	21

Арт.	Назва	Стор.
3102 3331	Тимчасовий абатмент Balance маленький 1,5 15° дентин	20
3102 3335	Cercon Balance C/ маленький 3,0 15°, дентин	21
3102 3336	Тимчасовий абатмент Balance маленький 3,0 15° дентин	20
3102 3350	Cercon Balance C/ великий 1,5 прямой, дентин	21
3102 3351	Тимчасовий абатмент Balance, великий 1,5 0° дентин	20
3102 3355	Cercon Balance C/ великий 3,0 прямой, дентин	21
3102 3356	Тимчасовий абатмент Balance великий 3,0 0° дентин	20
3102 3370	Cercon Balance C/ великий 1,5 15°, дентин	21
3102 3371	Тимчасовий абатмент Balance великий 1,5 15° дентин	20
3102 3375	Cercon Balance C/ великий 3,0 15°, дентин	21
3102 3376	Тимчасовий абатмент Balance великий 3,0 15° дентин	20
3102 4010	Формувач ясен Regular C/X GH 0,75	16 38
3102 4012	Формувач ясен Regular C/X GH 1,5	16 38
3102 4014	Формувач ясен Regular C/X GH 3,0	16 38
3102 4016	Формувач ясен Regular C/X GH 4,5	16 38
3102 4110	Абатмент Regular /X GH 0,75 / A 0	39
3102 4111	Абатмент Regular /X GH 0,75 / A 7,5	39
3102 4112	Абатмент Regular /X GH 0,75 / A 15	39
3102 4113	Абатмент Regular /X GH 0,75 / A 22,5	39
3102 4114	Абатмент Regular /X GH 0,75 / A 30	39
3102 4115	Абатмент Regular /X GH 0,75 / A 37,5	39
3102 4120	Абатмент Regular /X GH 1,5 / A 0	39
3102 4121	Абатмент Regular /X GH 1,5 / A 7,5	39
3102 4122	Абатмент Regular /X GH 1,5 / A 15	39
3102 4123	Абатмент Regular /X GH 1,5 / A 22,5	39
3102 4124	Абатмент Regular /X GH 1,5 / A 30	39
3102 4130	Абатмент Regular /X GH 3,0 / A 0	39
3102 4131	Абатмент Regular /X GH 3,0 / A 7,5	39
3102 4132	Абатмент Regular /X GH 3,0 / A 15	39
3102 4133	Абатмент Regular /X GH 3,0 / A 22,5	39
3102 4140	Абатмент Regular /X GH 4,5 / A 0	39
3102 4141	Абатмент Regular /X GH 4,5 / A 7,5	39

Арт.	Назва	Стор.
3102 4142	Абатмент Regular /X GH 4,5 / A 15	39
3102 4143	Абатмент Regular /X GH 4,5 / A 22,5	39
3102 4150	Абатмент Regular C/ GH 0,75 / A 0	17
3102 4151	Абатмент Regular C/ GH 0,75 / A 7,5	17
3102 4152	Абатмент Regular C/ GH 0,75 / A 15	17
3102 4153	Абатмент Regular C/ GH 0,75 / A 22,5	17
3102 4154	Абатмент Regular C/ GH 0,75 / A 30	17
3102 4155	Абатмент Regular C/ GH 0,75 / A 37,5	17
3102 4160	Абатмент Regular C/ GH 1,5 / A 0	17
3102 4161	Абатмент Regular C/ GH 1,5 / A 7,5	17
3102 4162	Абатмент Regular C/ GH 1,5 / A 15	17
3102 4163	Абатмент Regular C/ GH 1,5 / A 22,5	17
3102 4164	Абатмент Regular C/ GH 1,5 / A 30	17
3102 4170	Абатмент Regular C/ GH 3,0 / A 0	17
3102 4171	Абатмент Regular C/ GH 3,0 / A 7,5	17
3102 4172	Абатмент Regular C/ GH 3,0 / A 15	17
3102 4173	Абатмент Regular C/ GH 3,0 / A 22,5	17
3102 4180	Абатмент Regular C/ GH 4,5 / A 0	17
3102 4181	Абатмент Regular C/ GH 4,5 / A 7,5	17
3102 4182	Абатмент Regular C/ GH 4,5 / A 15	17
3102 4183	Абатмент Regular C/ GH 4,5 / A 22,5	17
3103 3025	Паралельна направляюча для фрези Ліндемана	42
3103 3026	Паралельна направляюча для спірального бура	42
3103 3031	Пружина для ключа-тріскачки	45
3103 3070	Насадка для ключа-тріскачки для ручних інструментів, коротка	45
3103 3080	Насадка для ключа-тріскачки для ручних інструментів, середня	45
3103 3090	Насадка для ключа-тріскачки для ручних інструментів, довга	45
3103 3095	Ручка для інструментів, екстра-довга	45
3103 3185	Конічна розгортка A 6,6 / A8	44
3103 3188	Конічна розгортка A 9,5	44
3103 3190	Конічна розгортка A 11	44
3103 3200	Конічна розгортка A 14	44
3103 3202	Конічна розгортка A 17	44
3103 3205	Конічна розгортка B 6,6 / B 8	44
3103 3208	Конічна розгортка B 9,5	44
3103 3210	Конічна розгортка B 11	44
3103 3220	Конічна розгортка B 14	44
3103 3230	Конічна розгортка B 17	44
3103 3233	Конічна розгортка C 6,6 / C 8	44

Арт.	Назва	Стор.
3103 3235	Конічна розгортка C 9,5	44
3103 3238	Конічна розгортка C 11	44
3103 3240	Конічна розгортка C 14	44
3103 3250	Конічна розгортка C 17	44
3103 3252	Конічна розгортка D 8	44
3103 3254	Конічна розгортка D 9,5	44
3103 3256	Конічна розгортка D 11	44
3103 3258	Конічна розгортка D 14	44
3103 3260	Мітчик для А-імплантатів	44
3103 3270	Мітчик для В-імплантатів	44
3103 3280	Мітчик для С-імплантатів	44
3103 3285	Мітчик для D-імплантатів	44
3103 3370	Рентгенологічний шаблон для імплантатів	05
3103 3400	Шестигранна викрутка 1,0 мм	58
3103 3410	Ручка для викрутки стандартна Ø 7 мм	58
3103 3415	Ручка для викрутки стандартна Ø 12 мм	58
3103 3434	Інструмент для видалення гвинта-заглушки, короткий	58
3103 3435	Інструмент для видалення гвинта-заглушки, довгий	58
3103 3450	Насадка-викрутка 1,6 мм плоска	58
3103 3455	Насадка-викрутка 1,0 мм шестигранна	58
3103 3456	Насадка-викрутка 1,0 мм шестигранна, коротка	58
3103 3460	Насадка-викрутка 1,0 мм плоска	58
3103 3471	Ключ для встановлення абатментів a-Standard, короткий	58
3103 3481	Ключ для встановлення абатментів b-Standard, короткий	58
3103 3485	Ключ для позиціонування кутових абатментів Standard	58
3103 3501	Активатор матриці шаровидного замка	58
3103 3502	Деактиватор матриці шаровидного замка	58
3103 3571	Фінішер для вузьких абатментів Balance Base59	59
3103 3580	Фінішер для конусного оклюзійного ретенційного гвинта	59
3103 3590	Фінішер для конусного латерального ретенційного гвинта	59
3103 3602	Ручка для аналогів абатментів і абатментів	59
3103 3611	Паралельна направляюча для SynCone 5°	27

Показчик продукції

Арт.	Назва	Стор.
3103 3621	Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки для а-абатментів	59
3103 3622	Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки для b-абатментів	59
3103 3623	Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки для абатментів з кульковим замком	59
3103 3625	Насадка-викрутка для ортопедичного ключа-тріскачки 1,0 мм шестигранна, 15 Нсм	59
3103 3626	Насадка-викрутка для ортопедичного ключа-тріскачки 1,0 мм шестигранна, коротка 10 Нсм	59
3103 3627	Насадка-викрутка для ортопедичного ключа-тріскачки 1,8 мм шестигранна	59
3103 3628	Насадка-викрутка для ортопедичного ключа-тріскачки 1,0 мм шестигранна, довга 15 Нсм	59
3103 3630	Ортопедичний ключ-тріскачка	59
3103 3632	Інструмент для монтажу насадок в ортопедичному ключі-тріскачці	59
3103 3633	Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки для а-абатментів, довга	59
3103 3634	Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки для b-абатментів, довга	59
3103 3635	Насадка для ортопедичного ключа-тріскачки для Locator	59
3103 3640	Лабораторна викрутка 10 Нсм	59
3103 4090	Пробійник слизової АТР	54
3103 4091	Гільза для пробійника слизової АТР	54
3103 4310	Експандер кістки розмір 01	51
3103 4320	Експандер кістки розмір 02	51
3103 4330	Експандер кістки розмір 03	51
3103 4340	Експандер кістки розмір 04	51
3103 4350	Маркер для позиціонування	51
3103 4352	Маркер для позиціонування, штиковий	51
3103 4360	Пілотний конденсор кістки	51
3103 4362	Пілотний конденсор кістки, штиковий	51
3103 4370	Конденсор кістки для А-імплантатів	51
3103 4372	Конденсор кістки для А-імплантатів, штиковий	51
3103 4380	Конденсор кістки для В-імплантатів	51
3103 4382	Конденсор кістки для В-імплантатів, штиковий	51
3103 4390	Конденсор кістки для С-імплантатів	51

Арт.	Назва	Стор.
3103 4392	Конденсор кістки для С-імплантатів, штиковий	51
3103 4510	Елеватор 01	50
3103 4520	Елеватор 02	50
3103 4530	Елеватор 03	50
3103 4540	Елеватор для мембрани, маленький	50
3103 4550	Елеватор для мембрани, великий	50
3103 4560	Елеватор для мембрани, маленький з подвійним вигином	50
3103 4570	Долото	50
3103 4580	Хірургічний молоток для синус-ліфтингу	50
3103 6120	Ортопедичний набір Ankylos	56
3103 6140	Ортопедичний набір Ankylos для системи абатментів Balance	56
3103 6150	Ортопедичний набір Ankylos для системи абатментів Standard	56
3103 6165	Ортопедичний міні-набір	56
3103 6300	Хірургічний набір експандерів кістки	51
3103 6320	Хірургічний набір конденсорів кістки	51
3103 6325	Хірургічний набір конденсорів кістки, штикових	51
3103 6350	Набір інструментів для синус-ліфтингу	50
3103 6503	Хірургічний набір ручних інструментів для встановлення імплантатів А, В, С	48
3103 6513	Хірургічний набір ручних інструментів для встановлення імплантатів А, В	48
3103 6523	Хірургічний набір машинних інструментів для встановлення імплантатів А, В	48
3103 6530	Хірургічний набір ExpertEase (навігаційний)	48
3103 6531	Лоток під хірургічний набір ExpertEase пустий	49
3103 6540	Лоток под хірургічний набір для встановлення імплантатів А, В, С, пустий	49
3103 6542	Лоток під хірургічний набір для встановлення імплантатів А, В, пустий	49
3103 6551	Кришка набору	49
3103 6560	Модуль для інструментів (пустий)	49
3103 6561	Модуль для ручних фрез А, пустий	49
3103 6562	Модуль для ручних фрез В, пустий	49
3103 6563	Модуль для ручних фрез С, пустий	49
3103 6564	Модуль для ручних фрез D, пустий	49
3103 6573	Модуль для машинних розгортки А, пустий	49
3103 6574	Модуль для машинних розгортки В, пустий	49

Арт.	Назва	Стор.
3103 6582	Модуль для інструментів GS, пустий	49
3103 6583	Модуль для фрез GS Ø 2,0, пустий	49
3103 6584	Модуль для фрез GS A, пустий	49
3103 6585	Модуль для фрез GS B, пустий	49
3103 6600	Лоток для миття Ankylos Washtray	48
3103 6601	Накладка Ankylos Washtray	49
3103 6602	Контейнер для стерилізації для лотка Ankylos Washtray	48
3103 7040	Кульковий бур Ø 1,8 мм	42
3103 7041	Фреза Ліндемана Ø 2 мм, L 8 мм	42
3103 7042	Фреза Ліндемана Ø 2 мм, L 11 мм	42
3103 7043	Спіралевидний бур, Ø 2 мм, S	42
3103 7044	Спіралевидний бур, Ø 2 мм, M	42
3103 7052	Спіралевидний бур для А-імплантів, S	43
3103 7053	Спіралевидний бур для А-імплантів, M	43
3103 7062	Спіралевидний бур для В-імплантів, S	43
3103 7063	Спіралевидний бур для В-імплантів, M	43
3103 7072	Спіралевидний бур для С-імплантів, S	43
3103 7073	Спіралевидний бур для С-імплантів, M	43
3103 7082	Спіралевидний бур для D-імплантів, S	43
3103 7083	Спіралевидний бур для D-імплантів, M	43
3103 7185	Конічна розгортка А 6,6 / А 8 (М)	44
3103 7188	Конічна розгортка А 9,5 (М)	44
3103 7190	Конічна розгортка А 11 (М)	44
3103 7200	Конічна розгортка А 14 (М)	44
3103 7202	Конічна розгортка А 17 (М)	44
3103 7205	Конічна розгортка В 6,6 / В 8 (М)	44
3103 7208	Конічна розгортка В 9,5 (М)	44
3103 7210	Конічна розгортка В 11 (М)	44
3103 7220	Конічна розгортка В 14 (М)	44
3103 7230	Конічна розгортка В 17 (М)	44
3103 7408	Подовжуючий інструмент HXSS	42
3103 7440	Мітчик для А-імплантів (М, HXSS)	44
3103 7450	Мітчик для В-імплантів (М, HXSS)	44
3103 7471	Імплантовод С/Х з викруткою, короткий	45
3103 7472	Імплантовод С/Х з викруткою, середній	45
3103 7473	Імплантовод С/Х з викруткою, довгий	45
3103 7500	Хірургічний ключ-тріскачка з індикатором моменту сили	45
3103 7502	Рожковий ключ С/Х	45
3103 7510	Насадка для ключа-тріскачки для машинних інструментів, коротка HXSS	45

Арт.	Назва	Стор.
3103 7511	Насадка для ключа-тріскачки для машинних інструментів, середня HXSS	45
3103 7512	Насадка для ключа-тріскачки для машинних інструментів, довга HXSS	45
3103 7530	Кільце з ПТФЕ (5 шт.)	45
3103 7531	Імплантовод для ручного встановлення імплантів С/Х, короткий	45
3103 7532	Імплантовод для ручного встановлення імплантів С/Х, середній	45
3103 7533	Імплантовод для ручного встановлення імплантів С/Х, довгий	45
3103 7539	Ручка для встановлення імплантів С/Х, екстра-довга	45
3103 7541	Імплантовод ANKYLOS для машинного встановлення імплантів С/Х, HXSS, короткий	45
3103 7543	Імплантовод ANKYLOS для машинного встановлення імплантів С/Х, HXSS, довгий	45
3103 7602	Пілотна фреза GS A	46
3103 7604	Пілотная фреза GS B	46
3103 7610	Мукотом GS A	46
3103 7612	Мукотом GS B	46
3103 7621	Спіралевидний бур GS Ø 2,0 / L 8	46
3103 7622	Спіралевидний бур GS Ø 2,0 / L 9,5	46
3103 7623	Спіралевидний бур GS Ø 2,0 / L 11	46
3103 7624	Спіралевидний бур GS Ø 2,0 / L 14	46
3103 7631	Тригранна фреза GS A 8	46
3103 7632	Тригранна фреза GS A 9,5	46
3103 7633	Тригранна фреза GS A 11	46
3103 7634	Тригранна фреза GS A 14	46
3103 7641	Тригранна фреза GS B 8	46
3103 7642	Тригранна фреза GS B 9,5	46
3103 7643	Тригранна фреза GS B 11	46
3103 7644	Тригранна фреза GS B 14	46
3103 7651	Конічна розгортка GS A 8 / 9,5	47
3103 7653	Конічна розгортка GS A 11 / 14	47
3103 7661	Конічна розгортка GS B 8 / 9,5	47
3103 7663	Конічна розгортка GS B 11 / 14	47
3103 7671	Мітчик GS A 8	47
3103 7672	Мітчик GS A 9,5	47
3103 7673	Мітчик GS A 11	47
3103 7674	Мітчик GS A 14	47
3103 7681	Мітчик GS B 8	47
3103 7682	Мітчик GS B 9,5	47

Покажчик продукції

Арт.	Назва	Стор.	Арт.	Назва	Стор.
3103 7683	Мітчик GS B 11	47	3104 5172	Лабораторний аналог абатмента b / 1,5 / 6,0 і b / 3,0 / 6,0 суцільний, 15°	32
3103 7684	Мітчик GS B 14	47	3104 5180	Моделювальний ковпачок a / 1,5 / 4,0 і a / 3,0 / 4,0	33
3103 7690	Імплантовод GS короткий, вузький для А-імплантатів C/X	47	3104 5182	Моделювальний ковпачок для мостовидних протезів a / 1,5 / 4,0 і a / 3,0 / 4,0	33
3103 7691	Імплантовод GS короткий, широкий для В-Імплантатів C/X	47	3104 5190	Моделювальний ковпачок a / 1,5 / 6,0 і a / 3,0 / 6,0	33
3103 7692	Імплантовод GS довгий, вузький для А-імплантатів C/X	47	3104 5192	Моделювальний ковпачок для мостовидних протезів a / 1,5 / 6,0 і a / 3,0 / 6,0	33
3103 7693	Імплантовод GS довгий, широкий для В-імплантатів C/X	47	3104 5200	Моделювальний ковпачок b / 1,5 / 4,0 і b / 3,0 / 4,0	33
3103 7701	Гільза для спіралевидного бура GS, вузька (10 шт.)	46	3104 5202	Моделювальний ковпачок для мостовидних протезів b / 1,5 / 4,0 і b / 3,0 / 4,0	33
3103 7702	Гільза для тригранної фрези GS A, вузька (10 шт.)	46	3104 5210	Моделювальний ковпачок b / 1,5 / 6,0 і b / 3,0 / 6,0	33
3103 7703	Гільза для тригранної фрези GS B, широка (10 шт.)	46	3104 5212	Моделювальний ковпачок для мостовидних протезів b / 1,5 / 6,0 і b / 3,0 / 6,0	33
3103 7706	Гільза для імплантовода GS A	47	3104 5220	Лабораторний аналог абатмента з кульковим замком	28
3103 7721	Абатмент для стабілізації GS A	47	3104 5270	Аналог А-імплантата Balance C/	15
3103 7722	Абатмент для стабілізації GS B	47	3104 5280	Тимчасовий ковпачок для абатментів Standard a / 1,5 / 4,0 і a / 3,0 / 4,0	32
3103 7723	Гільза для тригранної фрези GS A, широка (10 шт.)	46	3104 5290	Тимчасовий ковпачок для абатментів Standard a / 1,5 / 6,0 і a / 3,0 / 6,0	32
3103 7725	Гільза для спіралевидного бура GS, широка (10 шт.)	46	3104 5300	Тимчасовий ковпачок для абатментів Standard b / 1,5 / 4,0 і b / 3,0 / 4,0	32
3103 7726	Гільза для імплантовода GS B	47	3104 5310	Тимчасовий ковпачок для абатментів Standard b / 1,5 / 6,0 і b / 3,0 / 6,0	32
3103 7727	Набір вузьких гільз GS	46	3104 5322	Моделювальний ковпачок для вузького абатмента Balance Base	24
3103 7728	Набір широких гільз GS	46	3104 5332	Лабораторний аналог вузького абатмента Balance Base	24
3104 5011	Ковпачок для відбитків для абатментів Standard a / 1,5 / 4,0 і a / 3,0 / 4,0	32	3104 5400	Гвинт для трансфера Balance C/, короткий	15
3104 5021	Ковпачок для відбитків для абатментів Standard a / 1,5 / 6,0 і a / 3,0 / 6,0	32	3104 5402	Гвинт для трансфера Balance C/, довгий	15
3104 5031	Ковпачок для відбитків для абатментів Standard b / 1,5 / 4,0 і b / 3,0 / 4,0	32	3104 5410	Трансфер Ankylos Balance C/, короткий (техніка відкритої ложки)	15
3104 5041	Ковпачок для відбитків для абатментів Standard b / 1,5 / 6,0 і b / 3,0 / 6,0	32	3104 5412	Трансфер Ankylos Balance C/, довгий (техніка відкритої ложки)	15
3104 5140	Лабораторний аналог абатмента a / 1,5 / 4,0 і a / 3,0 / 4,0 суцільний, прямий	32	3104 5415	Трансфер Ankylos Balance C/ (техніка закритої ложки)	15
3104 5142	Лабораторний аналог абатмента a / 1,5 / 4,0 і a / 3,0 / 4,0 суцільний, 15°	32	3104 5416	Трансфер Ankylos Balance C/, вузький (техніка закритої ложки)	15
3104 5150	Лабораторний аналог абатмента a / 1,5 / 6,0 і a / 3,0 / 6,0 суцільний, прямий	32	3104 5500	Лабораторний набір примірювальних абатментів Ankylos Standard	55
3104 5152	Лабораторний аналог абатмента a / 1,5 / 6,0 і a / 3,0 / 6,0 суцільний, 15°	32	3104 5550	Примірочний абатмент C/ a / 1,5 / 4,0 прямий (4 шт.)	55
3104 5160	Лабораторний аналог абатмента b / 1,5 / 4,0 і b / 3,0 / 4,0 суцільний, прямий	32	3104 5560	Примірочний абатмент C/ a / 1,5 / 6,0 прямий (4 шт.)	55
3104 5162	Лабораторний аналог абатмента b / 1,5 / 4,0 і b / 3,0 / 4,0 суцільний, 15°	32			
3104 5170	Лабораторний аналог абатмента b / 1,5 / 6,0 і b / 3,0 / 6,0 суцільний, прямий	32			

Арт.	Назва	Стор.
3104 5570	Примірочний абатмент C/ a / 3,0 / 4,0 прямий (4 шт.)	55
3104 5580	Примірочний абатмент C/ a / 3,0 / 6,0 прямий (4 шт.)	55
3104 5590	Примірочний абатмент C/ b / 1,5 / 4,0 прямий (4 шт.)	55
3104 5600	Примірочний абатмент C/ b / 1,5 / 6,0 прямий (4 шт.)	55
3104 5610	Примірочний абатмент C/ b / 3,0 / 4,0 прямий (4 шт.)	55
3104 5620	Примірочний абатмент C/ b / 3,0 / 6,0 прямий (4 шт.)	55
3104 5630	Примірочний абатмент C/ a / 1,5 / 4,0 15° (4 шт.)	55
3104 5640	Примірочний абатмент C/ a / 1,5 / 6,0 15° (4 шт.)	55
3104 5650	Примірочний абатмент C/ a / 3,0 / 4,0 15° (4 шт.)	55
3104 5660	Примірочний абатмент C/ a / 3,0 / 6,0 15° (4 шт.)	55
3104 5670	Примірочний абатмент C/ b / 1,5 / 4,0 15° (4 шт.)	55
3104 5680	Примірочний абатмент C/ b / 1,5 / 6,0 15° (4 шт.)	55
3104 5690	Примірочний абатмент C/ b / 3,0 / 4,0 15° (4 шт.)	55
3104 5700	Примірочний абатмент C/ b / 3,0 / 6,0 15° (4 шт.)	55
3104 5710	Лабораторний набір примірочних абатментів Ankylos Balance Posterior	55
3104 5801	Позиціонер GS вузький для аналога А-імплантата	47
3104 5802	Позиціонер GS широкий для аналога В-імплантата	47
3104 7011	Аналог А-імплантата C/X	28 37
3104 7012	Аналог В-імплантата C/X	28
3104 7013	Аналог С-імплантата C/X	28
3104 7014	Аналог D-імплантата C/X	28
3104 7040	Трансфер Ankylos /X для методу відкритої ложки, короткий	37
3104 7042	Трансфер Ankylos /X для методу відкритої ложки, довгий	37
3104 7044	Трансфер Regular C/X для методу закритої ложки, короткий	37
3104 7046	Трансфер Regular C/X для методу закритої ложки, довгий	37
3104 7048	Подовжувач гвинта для методу відкритої ложки (10 шт.)	37

Арт.	Назва	Стор.
3104 7110	Аналог абатмента Regular C/X A 0	16 38
3104 7111	Аналог абатмента Regular C/X A 7,5	16 38
3104 7112	Аналог абатмента Regular C/X A 15	16 38
3104 7113	Аналог абатмента Regular C/X A 22,5	16 38
3104 7120	Ковпачок 3 в 1 Regular C/X 0°	16 38
3104 7121	Ковпачок 3 в 1 Regular C/X 7,5°	16 38
3104 7122	Ковпачок 3 в 1 Regular C/X 15°	16 38
3104 7123	Ковпачок 3 в 1 Regular C/X 22,5°	16 38
3105 6022	Фіксаційний гвинт, оклюзійний М 1,6 мм шестигранний	25 33
3105 6024	Фіксаційний гвинт, оклюзійний М 1,6 мм шестигранний, довгий	25
3105 6025	Фіксаційний гвинт, оклюзійний М 1,6 мм шестигранний, екстра-довгий	25
3105 6026	Фіксаційний гвинт, оклюзійний М 1,6 мм шестигранний, 19 мм	25
3105 6051	Ретенційний гвинт, латеральний шестигранний М 1 x 0,2	19 33
3105 6052	Гільза для ретенційного латерального шестигранного гвинта	19 33
3105 6140	Гвинт для золотого ковпачка 1,6мм	33
3105 6160	Золотий ковпачок, Degunorm а / 1,5 / 4,0 і а / 3,0 / 4,0 з гвинтом	33
3105 6170	Золотий ковпачок, Degunorm а / 1,5 / 6,0 і а / 3,0 / 6,0 з гвинтом	33
3105 6180	Золотий ковпачок, Degunorm b / 1,5 / 4,0 і b / 3,0 / 4,0 з гвинтом	33
3105 6190	Золотий ковпачок, Degunorm b / 1,5 / 6,0 і b / 3,0 / 6,0 з гвинтом	33
3105 6212	Золотий ковпачок для вузького абатмента Balance Base (Permador PDF)	24
3105 6216	Ретенційний ковпачок для вузького абатмента Balance Base	24
3105 6217	Ретенційний ковпачок для вузького абатмента Balance Base, довгий	24
3105 6218	Титановий ковпачок для вузького абатмента Balance Base	24
3105 6280	Гвинт-заглушка для прямого абатмента SynCone C/ 5°	27
3105 6301	Латеральний фіксаційний шестигранний гвинт М 1,4	17 39

Показчик продукції

Арт.	Назва	Стор.
3105 6304	Горизонтальне посадочне кільце для фіксаційного гвинта М 1,4	17 39
3107 1003	Багаторазовий фільтр контейнера для стерилізації лотка Washtray (2 шт.)	49
3107 1004	Тримач інструментів зі стрижнем стандарту ISO (5 шт.)	49
3107 1006	Тримач насадок для ключа-тріскачки (5 шт.)	49
3109 9201	Акрилова модель верхньої щелепи, 3 імпланти C/X	60
3109 9240	Акрилова модель нижньої щелепи, 4 імпланти	60
3109 9261	Акрилова модель SynCone з ортопедичними конструкціями	60
3109 9262	Модель для демонстрації зміни кута нахилу абатментів SynCone	60
3109 9265	Акрилова модель нижньої щелепи SmartFix	60
45 - 3340	4-компонентна викрутка Locator	29
45 - 3341	Гільза тримача абатмента Locator	29
45 - 3345	Кутомір Locator	29
45 - 3346	Штифт Locator для перевірки паралельності	29
45 - 3347	Набір аттачментів Locator (титан)	29
45 - 3348	Набір аттачментів Locator (нерж. сталь)	29
45 - 3349	Змінна патриця Locator — прозора, сильна ретенція	29
45 - 3350	Змінна патриця Locator — рожева, слабка ретенція	29
45 - 3351	Змінна патриця Locator — синя, дуже слабка ретенція	29
45 - 3352	Змінна патриця Locator — розширений спектр: зелена, сильна ретенція	29
45 - 3353	Змінна патриця Locator — розширений спектр: помаранчева, слабка ретенція	29
45 - 3354	Змінна патриця Locator — розширений спектр: червона, дуже слабка ретенція	29
45 - 3355	Ковпачки для відбитків Locator (4 шт.)	29
45 - 3356	Матричні аналоги Locator D 4 (4 шт.)	29
45 - 3358	Чорна робоча патриця Locator	29
45 - 3359	Спейсерне кільце Locator	29
45 - 3360	Змінна патриця Locator — розширений спектр: сіра, нульова ретенція	29
45 - 3361	Спейсерний ковпачок Locator	29
90 - 5005	Універсальний шланг системи охолодження Frios ISU	53
90 - 5030	Прямий наконечник Frios	52

Арт.	Назва	Стор.
90 - 5042	Ірригаційна трубка для кутового наконечника Frios 20:1	53
90 - 5043	Довга внутрішня ірригаційна трубка (для подовжувача фрези)	53
90 - 5050	Кутовий наконечник Frios	52
90 - 6410	Хірургічний мотор фізіодиспенсера Frios S	53
90 - 6420	Ножна педаль фізіодиспенсера Frios S	53
90 - 6440	Шланг системи охолодження фізіодиспенсера Frios S (кабель мотора 1,8 м)	53
90 - 6441	Шланг системи охолодження фізіодиспенсера Frios S (кабель мотора 3,5 м)	53
90 - 6442	Стерильна захисна плівка для фізіодиспенсерів Frios S, Frios E	53
90 - 6443	Набір фіксаторів трубок для фізіодиспенсера Frios S	53
90 - 6446	Шланг системи охолодження фізіодиспенсера Frios S/i	53
90 - 6542	Шланг системи охолодження фізіодиспенсера Frios E	53
90 - 6600	Фізіодиспенсер Frios S/i 220-240 В зм. струму	52
90 - 6605	Фізіодиспенсер Frios S/i 100-130 В зм. струму	52
90 - 6620	Хірургічний мотор фізіодиспенсера Frios S/i	53
90 - 6630	Ножна педаль Frios S/i	53
90 - 6710	Кутовий наконечник Frios WI-75	52
90 - 6720	Кутовий наконечник Frios WS-75	52
90 - 6810	Кутовий наконечник Frios WI-75 LED G	52
90 - 6850	Прямий наконечник Frios SI-11 LED G	52

Зазначена продукція може не мати дозволів/допуску/сертифікації на деяких ринках. Детальну інформацію про актуальний асортимент продукції можна дізнатися у місцевому відділі продажів компанії Dentsply Sirona Implants. З метою покращення читабельності документа компанія Dentsply Sirona Implants не використовує символи ® та ™ в основному тексті. Однак компанія Dentsply Sirona Implants не відмовляється від своїх прав на товарні знаки, і даний документ не може бути витлумачено інакше.

Зверніть увагу, що показані в каталозі розміри можуть відрізнятися від оригінальних через особливості друку.

Маркування матеріалів

Інформація про матеріали, що використовуються в імплантатах, компонентах систем та інструментах, наводиться за допомогою символу виноска, що вказується після кожного елемента: формувач ясен Ankylos Regular C/X4. На стор. 61 каталога наведено опис матеріалів, що використовуються, та їх склад. Зображення в цьому каталозі мають виключно ілюстративний характер. Розміри зображених виробів можуть відрізнятися від розмірів оригінальних виробів. Компанія Dentsply Sirona Implants залишає за собою право вносити технічні зміни без попереднього сповіщення.

Примітки



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБЮТОР ANKYLOS® В УКРАЇНІ

М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 9/47

ТЕЛ. +38 (044) 590-15-01

МОБ. +38 (050) 430-48-63

E-MAIL: MEDMARKET_PREMIUM_SOLUTIONS@KMM.COM.UA

WWW.PREMIUM-MEDMARKET.COM.UA

ГРУПА КОМПАНІЙ «МЕДМАРКЕТ»

Про компанію Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants пропонує всеосяжні рішення для всіх етапів імплантаційного лікування, в тому числі імплантаційні лінійки Ankylos®, Astra Tech Implant System® і Xive®; цифрові технології, такі як високоіндивідуалізовані CAD/CAM компоненти Atlantis®, та рішення для направленої хірургічного лікування Simplant®; рішення для регенерації тканин Symbios® та програми професійного і бізнес-розвитку, такі як STEPPS™. Dentsply Sirona Implants - надійний партнер професіоналів в сфері стоматології, що забезпечує можливість досягати прогнозованих та довготривалих результатів імплантологічного лікування і покращувати якість життя пацієнтів.

Про компанію Dentsply Sirona

Dentsply Sirona є найбільшим в світі виробником продуктів та технологій для професійного стоматологічного застосування зі 130-річною історією інновацій та обслуговування стоматологів і пацієнтів в усьому світі. Dentsply Sirona займається розробкою, виробництвом та продажем повної лінійки рішень, включно зі стоматологічною продукцією та продукцією для гігієни ротової порожнини, а також іншими витратними медичними виробами з обширного асортименту брендів світового класу.

Продукція Dentsply Sirona під маркою THE DENTAL SOLUTIONS COMPANY™ це високоякісні, інноваційні та ефективні рішення для більш якісного, швидкого та безпечного стоматологічного лікування. Головний офіс компанії Dentsply Sirona знаходиться в місті Йорк (Пенсильванія, США), міжнародний офіс - у місті Зальцбург, Австрія. Акції компанії представлені на американській фондовій біржі NASDAQ під кодом XRAY.

Більше інформації про компанію Dentsply Sirona та її продукцію на сайті www.dentsplysirona.com.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

